



ONESTEP+ DRUG OF ABUSE RAPID URINE TEST CUP

570-3927 570-3928

EN

For medical and other professional in vitro diagnostic use.

Instructions For Use

Instructions for use for a cup device consisting of any combination of assays for the detection of the following drugs: 6-Monoacetylmorphine, d-Amphetamine, Benzoyllecgonine, Buprenorphine, EDDP, Norfentanyl, d/l-Methadone, d-Methamphetamine, d/l-Methylenedioxymethamphetamine, Morphine, Nortriptyline, Oxazepam, Oxycodone, Phencyclidine, d-Propoxyphene, Secobarbital, THC-COOH and Tramadol in human urine.

INTENDED USE

Henry Schein ONESTEP+ Drug of Abuse Rapid Urine Test Cup is a rapid lateral flow immunoassay for the qualitative detection of 6-Monoacetylmorphine, d-Amphetamine, Benzoyllecgonine, Buprenorphine, EDDP, Norfentanyl, Methadone, d-Methamphetamine, d/l-Methylenedioxymethamphetamine, Morphine, Nortriptyline, Oxazepam, Oxycodone, Phencyclidine, d-Propoxyphene, Secobarbital, THC-COOH and Tramadol in human urine. The test cut-off concentrations and the compounds the tests are calibrated to are as follows:

Test	Calibrator	Cut-off (ng/mL)
6-MAM	6-Monoacetylmorphine	10
AMP	d-Amphetamine	500/1000
BAR	Secobarbital	300
BUP	Buprenorphine	10
BZO	Oxazepam	300
COC	Benzoyllecgonine	150/300
EDDP	2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine	300
FEN or FYL	Norfentanyl	5
MDMA	Methylenedioxymethamphetamine	500
MET	d-Methamphetamine	500/1000
MTD	Methadone	300
OPI	Morphine	300/2000
OXY	Oxycodone	100
PCP	Phencyclidine	25
PPX	d-Propoxyphene	300
TCA	Nortriptyline	1000
THC	11-nor-Δ9-THC-COOH	50
TRA or TML	Tramadol	100

The single or multi-test cups can consist of up to eighteen (18) of the above listed analytes in any combination with or without on-board adulteration/specimen validity tests (SVT).

The tests provide only a preliminary result. A more specific alternative chemical method must be used to obtain a confirmed positive result. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS), and their tandem mass-spectrometer versions are the preferred confirmatory methods. Careful consideration and judgment should be applied to any drugs of abuse screen test result, particularly when evaluating preliminary positive results.

PRINCIPLE

The Henry Schein ONESTEP+ Drug of Abuse Rapid Urine Test Cup is an immunoassay based on the principle of competitive binding. Drugs which may be present in the urine specimen compete against their respective drug conjugate for binding sites on their specific antibody. During testing, a urine specimen migrates upward by capillary action. A drug, if present in the urine specimen below the respective cut-off concentration, will not saturate the binding sites of the specific antibody coated on the particles. The antibody coated particles will then be captured by the immobilized drug conjugate and a visible colored line will show up in the test line region of the specific drug strip. The colored line will not form in the test line region if the drug level is above the respective cut-off concentration because the drug will saturate all the binding sites of the specific antibody coated on the particles.

A drug-positive urine specimen will not generate a colored line in the specific test line region of the strip because of drug competition, while a drug-negative urine specimen or a specimen containing a drug concentration less than the cut-off will generate a line in the test line region. To serve as a procedural control, a colored line will always appear at the control line region indicating that proper volume of specimen has been added and membrane wicking has occurred.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- For in vitro diagnostic use only.
- Treat all urine specimens and materials as if capable of transmitting infection. Wear gloves and proper laboratory attire to prevent skin contact with urine specimens. Proper handling and disposal methods should be established.
- Do not use the test kit after the expiration date.
- The device should remain in the sealed pouch until ready for use.
- The test is for single use. Do not reuse the test.
- Do not touch the test zone of the test cup.

STORAGE AND STABILITY

The Henry Schein ONESTEP+ Drug of Abuse Rapid Urine Test Cup should be stored at 2-30°C (36-86°F) in the original sealed pouch.

The device is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. Do not use the device after the expiration date printed on the pouch.

- The device should remain in the sealed pouch until ready for use, however, the device will remain stable for up to 1 hour after opening.
- Do not freeze. (Temperature below 0°C [32°F]).

MATERIALS

Materials Provided:

- Test Devices (individually sealed in foil pouch)
- Instructions For Use
- Specimen Validity/Adulteration Color Card (if applicable)
- Disposable Gloves
- Procedure Card
- Security seal labels

Materials Required but not Provided:

- Timer, clock, or watch

SPECIMEN COLLECTION & PREPARATION


- Fresh urine does not require any special pretreatment, and the specimen may be collected at any time of the day.
- If the specimen is not tested within 24 hours of collection, the sample may be refrigerated [2-8°C (36-46°F)] for up to 7 days or frozen at -20°C (4°F) for up to 1 year.
- If refrigerated or frozen, allow the test device, controls, and/or specimens to equilibrate to room temperature [15-30°C (59-86°F)] prior to testing.

DIRECTIONS FOR USE

Do not open the test device pouch until the test is ready to be performed. The device must be used within 1 hour of opening the pouch.

1. Remove the test device from the sealed pouch. If required by your process, write the donor's name or ID on the label in the provided space. (Fig. 1)
2. Open the test cup lid. Urinate directly into the test cup. Be sure to fill the test cup with the urine specimen between a minimum to a maximum level (marked on the cup). (Fig. 2)
3. After the urine specimen has been collected, close the lid securely and return the cup to a collection official. (Fig. 3)
4. The collection official should peel off the label to reveal the test result (s). (Fig. 4)
5. Interpret the test results. (Fig. 5) Read the results at 5 minutes. **Do not interpret the result before 5 minutes or after 30 minutes.** Refer to illustration 5 in the test schematic for possible test results.

Note: Negative test results can be interpreted as soon as the Control lines appear and there are visible Test lines which usually occurs within 1 minute. Positive drug screen test results should be read at 5 minutes. All results remain stable for 30 minutes.

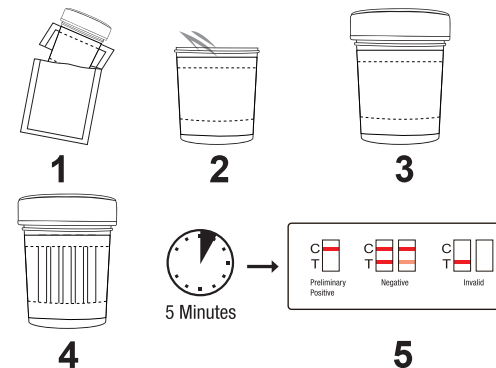

INTERPRETATION OF RESULTS

(Please refer to the illustration below)

NEGATIVE: * Two lines appear. One red line should be in the control region (C), and another red or pink line should be adjacent to the test region (Drug/T). This negative result indicates there is no drug in the specimen, or the drug is present but below the cutoff concentration of the test.

***NOTE:** The shade of red in the test line region (Drug/T) may vary, but it should be considered negative whenever there is even a faint pink line.


PRELIMINARY POSITIVE: One red line appears in the control region (C). No line appears in the test region (Drug/T). This preliminary positive result indicates the specimen may contain the drug at a concentration above the cutoff level of the test.

IMPORTANT: A positive result on a drug screen is called preliminary for a reason. A more specific alternative chemical method must be used to obtain a confirmed positive result.

INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the test procedure and repeat the test using a new test device. If the problem persists, discontinue using the lot immediately and contact Technical Service at 1-866-982-3818.

Note: There is no meaning attributed to line color intensity or width of test lines.

A preliminary positive test result does not always indicate that the donor took illegal drugs, and a negative test result does not always indicate the donor did not take illegal drugs. There are several factors that influence the reliability of drug tests.

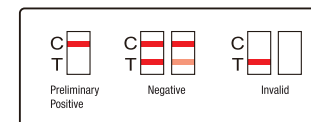

ADULTERANT INTERPRETATION

Semiquantitative results are obtained by visually comparing the reacted color blocks on the strip to the printed color blocks on the color chart.

Please refer to the color card provided in this kit for adulteration result interpretation. Read adulteration test pads at 2 minutes.

	NO ADULTERATION	ADULTERATION
OXI		
SG		
pH		
NIT		
GLUT		
CREA		

QUALITY CONTROL

A procedural control is embedded on each test strip. A red line appearing in the control region (C) is an internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume, adequate membrane wicking, and correct procedural technique.

External control standards are not supplied with this kit. However, positive and negative controls are recommended to be tested as good laboratory practice to confirm the test procedure and to verify proper test performance. Quality control testing should be performed with each new lot and new operator. Follow local, state and federal laws and regulations. Please contact our Technical Support at 1-866-982-3818 for information regarding the controls that work with the device.

LIMITATIONS

- 1. The Henry Schein ONESTEP+ Drug of Abuse Rapid Urine Test Cup provides only a qualitative, preliminary analytical result. A more specific alternative chemical method must be used to obtain a confirmed preliminary positive result. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS), and their tandem mass-spectrometer versions are the preferred confirmatory methods.
- 2. There is a possibility that technical or procedural errors, as well as other interfering substances in the urine specimen may cause incorrect results.
- 3. Substances intentionally put into the specimen, such as bleach or peroxide, may produce incorrect results regardless of the analytical method used.
- 4. A positive result does not indicate level of intoxication, administration route, or concentration of the drug in the urine specimen.
- 5. A negative result may not necessarily indicate drug-free urine. Negative results are possible if the drug concentration is below the cutoff level.
- 6. The test does not distinguish between drugs of abuse and certain medications.
- 7. A positive result might be obtained from certain foods or food supplements.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Accuracy

The accuracy of the Henry Schein ONESTEP+ Drug of Abuse Rapid Urine Test Cup was evaluated with 3 operators and 80 clinical urine specimens per operator. The specimens were analyzed by LC-MS and by the Henry Schein ONESTEP+ Drug of Abuse Rapid Urine Test Cup. Samples were divided by concentration into five categories: drug-free, less than half the cutoff, near cutoff negative, near cutoff positive, and high positive. Results were as follows:

6-MAM

Results		6-MAM10		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 10ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 10ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator B	Above 10ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 10ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator C	Above 10ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 10ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Accuracy	96.25%		

Amphetamine (AMP500)

Results		AMP500		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator B	Above 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator C	Above 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		

Amphetamine (AMP)

Results		AMP1000		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		
Operator B	Above 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 1000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator C	Above 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		

Secobarbital (BAR)

Results		BAR300		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator B	Above 300ng/mL (+)	40	0	100.00%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	98.75%		
Operator C	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		

Buprenorphine (BUP)

Results		BUP10		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 10ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 10ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Accuracy	95.00%		
Operator B	Above 10ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 10ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator C	Above 10ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 10ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Accuracy	95.00%		

Oxazepam (BZO)

Results		BZO300		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator B	Above 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		

Operator C	Above 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		

Cocaine (COC150)

Results		COC150		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 150ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 150ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator B	Above 150ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 150ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator C	Above 150ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 150ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		

Cocaine (COC)

Results		COC300		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator B	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Accuracy	96.25%		
Operator C	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		

EDDP

Results		EDDP300		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator B	Above 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator C	Above 300ng/mL (+)	40	0	100.00%
	Lower 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	100.00%		

Norfentanyl (FEN or FYL)

Results		FYL5		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	

Operator A	Above 5ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 5ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Accuracy	96.25%		
Operator B	Above 5ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 5ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator C	Above 5ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 5ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		

Methamphetamine (MET500)

Results		MET500		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 500ng/mL (+)	40	0	100.00%
	Lower 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	98.75%		
Operator B	Above 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator C	Above 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		

Methamphetamine (MET)

Results		MET100		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		
Operator B	Above 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 1000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator C	Above 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		

Methadone (MTD)

Results		MTD300		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator B	Above 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	97.50%		

Operator C	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		

Opiates (OPI)

Results		OPI300		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator B	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		
Operator C	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		

Opiates (OPI2000)

Results		OPI2000		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 2000ng/mL (+)	40	0	100.00%
	Lower 2000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	100.00%		
Operator B	Above 2000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 2000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator C	Above 2000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 2000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		

Oxycodone (OXY)

Results		OXY100		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 100ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator B	Above 100ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator C	Above 100ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		

Phencyclidine (PCP)

Results		PCP25		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	

Operator A	Above 25ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 25ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator B	Above 25ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 25ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator C	Above 25ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 25ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		

Propoxyphene (PPX)

Results		PPX300		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		
Operator B	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator C	Above 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		

Northriptyline (TCA)

Results		TCA1000		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 1000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator B	Above 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 1000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator C	Above 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Accuracy	98.75%		

Marijuana (THC)

Results		THC50		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 50ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 50ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator B	Above 50ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 50ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Accuracy	95.00%		

Operator C	Above 50ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 50ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		

Tramadol (TRA or TML)

Results		TML100		% Agreement with LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operator A	Above 100ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Lower 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	96.25%		
Operator B	Above 100ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		
Operator C	Above 100ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Lower 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Accuracy	97.50%		

Analytical Specificity/Cross-Reactivity

The specificity of each assay was determined through the testing of contrived solutions made by spiking certified standards of chemically related or structurally similar compounds into drug free urine. The relative cross-reactivity (if any) represents the minimum concentration necessary to yield a result similar to the cutoff level of the assay.

Drug	Concentration (ng/ml)	%Cross-Reactivity
6-MAM		
6-Monoacetylmorphine (6-MAM)	10	100%
6-acetylmorphine	10	100%
Heroin	60	16.7%
Morphine	75,000	0.01%
s-Monoacetylmorphine	10	100%
Normorphine	>100,000	--
Nalorphine HCl	>100,000	--
Hydrocodone	>100,000	--
Hydromorphone	>100,000	--
Chlordiazepoxide	>100,000	--
Clobazam	>100,000	--
D-Amphetamine	>100,000	--
(±)-Amphetamine	>100,000	--
Levorphanol tartrate	>100,000	--
Codeine	>100,000	--
Ethylmorphine	>100,000	--
Morphine3-β-D-glucuronide	>100,000	--
Norcodeine	>100,000	--
Oxycodone	>100,000	--
Oxymorphone	>100,000	--
Procaine hydrochloride	>100,000	--

Thebaine	>100,000	--
6-Acetylcodeine	>100,000	--
Buprenorphine	>100,000	--
Dihydrocodeine	>100,000	--
Dextromethorphan	>100,000	--
Imipramine hydrochloride	>100,000	--
Meperidine	>100,000	--
(±)-Methadone	>100,000	--
Mitragynine(kratom)	>100,000	--
Morphine-6-β-D-glucuronide	>100,000	--
Naloxone hydrochloride	>100,000	--
Naltrexone hydrochloride	>100,000	--
Naproxen	>100,000	--
Norbuprenorphine	>100,000	--
Norbuprenorphine-3-D-Glucuronide	>100,000	--
Noroxycodone HCL	>100,000	--
Noroxymorphone HCL	>100,000	--
(+)-Norpropoxyphene maleate	>100,000	--
Oxymorphone-3β-D-glucuronide	>100,000	--
Tapentadol HCl	>100,000	--
Tramadol hydrochloride	>100,000	--
Amphetamine (AMP500)		
D-Amphetamine	500	100%
Hydroxyamphetamine	4,000	12.5%
(+/-)-Methylenedioxyamphetamine(MDA)	200	250%
D,L-Amphetamine	500	100%
Diethylstilbestrol	2,500	20%
L-Amphetamine	25,000	2%
Phentermine	4,000	12.5%
β-Phenylethylamine	50,000	1%
Tyramine	50,000	1%
p-Hydroxynorephedrine	50,000	1%
p-Hydroxyamphetamine	50,000	1%
D,L-Norephedrine	50,000	1%
(+/-)3,4-Methylenedioxy-n-		
ethylamphetamine(MDEA)	100,000	0.5%
d-Methamphetamine	>100,000	--
l-Methamphetamine	>100,000	--
(+/-)3,4-Methylenedioxyamphetamine		
(MDMA)	>100,000	--
Ephedrine hydrochloride	>100,000	--

Phenylpropanolamine	>100,000	--
Benzphetamine *	>100,000	--
L-Ephedrine	>100,000	--
L-Epinephrine	>100,000	--
D,L-Epinephrine	>100,000	--
Amphetamine (AMP)		
D-Amphetamine	1,000	100%
Hydroxyamphetamine	8000	12.5%
(+/-)-Methylenedioxyamphetamine(MDA)	400	250%
D,L-Amphetamine	1,000	100%
Diethylstilbestrol	5,000	20%
L-Amphetamine	50,000	2%
Phentermine	8,000	12.5%
β-Phenylethylamine	100,000	1%
Tyramine	100,000	1%
p-Hydroxynorephedrine	100,000	1%
D,L-Norephedrine	100,000	1%
p-Hydroxyamphetamine	100,000	1%
D-Methamphetamine	>100,000	--
L-Methamphetamine	>100,000	--
Ephedrine hydrochloride	>100,000	--
(+/-)3,4- Methylenedioxyamphetamine		
(MDMA)	>100000	--
Phenylpropanolamine	>100,000	--
Benzphetamine *	>100,000	--
L-Ephedrine	>100,000	--
L-Epinephrine	>100,000	--
D,L-Epinephrine	>100,000	--
(+/-)3,4-Methylenedioxyethylamphetamine (MDEA)	>100,000	--
Secobarbital (BAR)		
Secobarbital	300	100%
Alphenal	150	200%
Amobarbital	300	100%
Aprobarbital	250	120%
Butabarbital	2,500	12%
Butethal	100	300%
Cyclopentobarbital	600	50%
Pentobarbital	250	120%
Phenobarbital	250	120%

Butalbital	2,500	12%
Buprenorphine (BUP)		
Buprenorphine	10	100%
Buprenorphine -3-D-Glucuronide	160	6.25%
Norbuprenorphine	10	100%
Norbuprenorphine-3-D-Glucuronide	200	5%
Morphine	>100,000	--
Oxymorphone	>100,000	--
Hydromorphone	>100,000	--
Oxazepam (BZO)		
Oxazepam	300	100%
a-Hydroxyalprazolam	1,260	23.8%
Alprazolam	200	150%
Bromazepam	1,560	19.2%
Chlordiazepoxide	1,560	19.2%
Clobazam	100	300%
Clonazepam	2,500	12%
Clorazepate Dipotassium	200	150%
Desalkylflurazepam	400	75%
Diazepam	200	150%
Estazolam	2,500	12%
Flunitrazepam	400	75%
D,L-Lorazepam	1,560	19.2%
Midazolam	12,500	2.4%
Nitrazepam	100	300%
Norchlordiazepoxide	200	150%
Nordiazepam	400	75%
Oxazepam glucuronide	500	60%
R,S-Lorazepam glucuronide	160	187.5%
Temazepam	100	300%
Triazolam	2,500	12%
Demoxepam	2,000	15%
Flurazepam	500	60%
Delorazepam	>100,000	--
Cocaine (COC150)		
Benzoylecgonine	150	100%
Cocaethylene	150	100%
Cocaine hydrochloride	150	100%
Ecgonine	25,000	0.6%

Norcocaine	50,000	0.3%
Ecgonine methyl Ester	>100,000	--
Cocaine (COC)		
Benzoylecgonine	300	100%
Cocaethylene	300	100%
Cocaine hydrochloride	300	100%
Ecgonine	50,000	0.6%
Norcocaine	100,000	0.3%
Ecgonine methyl ester	>100,000	--
EDDP		
EDDP perchlorate	300	100%
Methadone	>100,000	--
EMDP	>100,000	--
Doxylamine	>100,000	--
Disopyramide	>100,000	--
LAAM (Levo-alpha-acetylmethadol) HCl	>100,000	--
Alpha Methadol	>100,000	--
Norfentanyl (FEN or FYL)		
Norfentanyl	5	100%
Fentanyl	10	50%
Acetyl fentanyl	150	3.3%
Acetyl Norfentanyl	200	2.5%
(±)-β-Hydroxythiofentanyl HCl	2,500	0.2%
Acryl Fentanyl	2,500	0.2%
Butyryl Fentanyl	5,000	0.1%
Cis-d, l 3-Methylfentanyl	50,000	0.01%
Furanyl Fentanyl	10,000	0.05%
Para-fluoro butyrl Fentanyl (P-FBF)	80,000	0.01%
Para-fluoro Fentanyl	40,000	0.005%
9-HydroxyRisperidone	10,000	0.05%
Alfentanil	20,000	0.03%
Isobutyryl Fentanyl	5,000	0.1%
Norcarfentail Oxalate	50,000	0.01%
Remifentanil	15,000	0.03%
Valeryl Fentanyl	20,000	0.03%
Thienyl Fentnail	50	10%
Trans-d, l 3-Methylfentanyl	50	10%
4-Fluoro-isobutyryl Fentanyl	>20,000	--
Despropionyl fentanyl (4-ANPP)	>20,000	--

MT-45	>100,000	--
Ocfentanil	>100,000	--
Risperidone	>100,000	--
Sufentanil	>100,000	--
Carfentanil Oxalate	>10,000	--
Labetalol Hydrochloride	>100,000	--
Trazodone	>100,000	--
U-47700	>100,000	--
ω-1-Hydroxyfentanyl	>20,000	--
For Opioids compounds		
6-Acetyl morphine	>100,000	--
Amphetamine	>100,000	--
Buprenorphine	>100,000	--
Buprenorphine -3-D-Glucuronide	>100,000	--
Codeine	>100,000	--
Dextromethorphan	>100,000	--
Dihydrocodeine	>100,000	--
EDDP	>100,000	--
EMDP	>100,000	--
Fluoxetine	>100,000	--
Heroin	>100,000	--
Hydrocodone	>100,000	--
Hydromorphone	>100,000	--
Ketamine	>100,000	--
Levorphanol tartrate	>100,000	--
Meperidine	>100,000	--
Methadone	>100,000	--
Morphine	>100,000	--
Morphine-3-β-D-glucuronide	>100,000	--
Naloxone hydrochloride		
hydrochloridehydrochloridehydrochloride	>100,000	--
Naltrexone hydrochloride	>100,000	--
Norbuprenorphine	>100,000	--
Norcodeine	>100,000	--
Norketamine	>100,000	--
Normeperidine	>100,000	--
Normorphine	>100,000	--
Noroxycodone	>100,000	--
Oxycodone	>100,000	--
Oxymorphone	>100,000	--
Pentazocine (Talwin)	>100,000	--
Pipamperone	>100,000	--

Tapentadol hydrochloride	>100,000	--
Thioridazine	>100,000	--
Tilidine	>100,000	--
Tramadol	>100,000	--
o-Desmethyl Tramadol	>100,000	--
n-Desmethyl Tramadol	>100,000	--
Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)		
(±)-MDMA	500	100%
(+/-)3,4-Methylenedioxy-n-ethylamphetamine(MDEA)	300	166.7%
(+/-)-Methylenedioxyamphetamine(MDA)	3,000	16.7%
L-Methamphetamine	50,000	1%
7-Aminoclonazepam	100,000	0.5%
d-methamphetamine	>100,000	--
d-amphetamine	>100,000	--
l-amphetamine	>100,000	--
Methamphetamine (MET500)		
D-Methamphetamine	500	100%
(+/-)3,4-Methylenedioxy-n-ethylamphetamine		
(MDEA)	10,000	5%
(±)-MDMA	1,250	40%
L-Methamphetamine	12,500	4%
Fenfluramine	25,000	2%
p-Hydroxymethamphetamine	5,000	10%
D,L-Methamphetamine	500	100%
β-Phenylethylamine	25,000	2%
Mephetermine	25,000	2%
Methoxyphenamine hydrochloride	25,000	2%
L-Amphetamine	40,000	1.25%
Ephedrine hydrochloride	100,000	0.5%
(1R,2S)-(-)-Ephedrine	100,000	0.5%
D-Amphetamine	>100,000	--
Chloroquine	>100,000	--
(+/-)3,4- Methylenedioxyamphetamine(MDA)	>100,000	--
L-Phenylephrine	>100,000	--
Trimethobenzamide	>100,000	--
Procaine hydrochloride	>100,000	--
d/l-Amphetamine	>100,000	--

Methamphetamine (MET)		
D-Methamphetamine	1,000	100%
(+/-)3,4-Methylenedioxy-n-ethylamphetamine		
(MDEA)	20,000	5%
(+/-)3,4-Methylenedioxyamphetamine		
(MDMA)	2,500	40%
L-Methamphetamine	25,000	4%
Fenfluramine	50,000	2%
p-Hydroxymethamphetamine	10,000	10%
D,L-Methamphetamine	1,000	100%
β-Phenylethylamine	50,000	2%
Mephetermine	50,000	2%
Methoxyphenamine hydrochloride	50,000	2%
L-Amphetamine	75,000	1.33%
D-Amphetamine	>100,000	--
D,L-Amphetamine	>100,000	--
Chloroquine	>100,000	--
Ephedrine HCl	>100,000	--
(+/-)3,4-Methylenedioxyamphetamine (MDA)	>100,000	--
Trimethobenzamide	>100,000	--
l-phenylephrine	>100,000	--
(1R,2S)-(-)-Ephedrine	>100,000	--
Procaine hydrochloride	>100,000	--
Methadone (MTD)		
(±)-Methadone	300	100%
EDDP	>100,000	--
EMDP	>100,000	--
LAAM	>100,000	--
Alpha Methadol	>100,000	--
Doxylamine	>100,000	--
Opiates (OPI)		
Morphine	300	100%
6-acetylmorphine	400	75%
Codeine	300	100%
Dihydrocodeine	1,000	30%
Ethylmorphine	100	300%
Heroin	600	50%
Hydrocodone	500	60%
Hydromorphone	1,000	30%

Levorphanol tartrate	10,000	3%
Nalorphine HCl	50,000	0.6%
Thebaine	6,240	4.8%
s-Monoacetylmorphine	300	100%
Morphine-3-β-d-glucuronide	1,000	30%
6-Monoacetylmorphine (6-MAM)	150	200%
Codeine-6-β-D-glucuronide	150	200%
Morphine-6-β-D-glucuronide	150	200%
6-Acetylcodeine	900	33.3%
Normorphine	>100,000	--
Oxycodone	>100,000	--
Oxymorphone	>100,000	--
Norcodeine	>100,000	--
Procaine	>100,000	--
Norpropoxyphene	>100,000	--
Opiates (OPI2000)		
Morphine	2,000	100%
6-acetylmorphine	2,500	80%
Codeine	1,000	200%
Dihydrocodeine	1,500	133.3%
EthylMorphine	2,500	80%
Codeine-6-β-D-glucuronide	2,500	80%
Heroin	5,000	40%
Hydrocodone	5,000	40%
Hydromorphone	2,500	80%
Levorphanol tartrate	10,000	20%
Nalorphine hydrochloride	5,000	40%
Norcodeine	4,000	50%
Normorphine	5,000	40%
Oxymorphone	75,000	2.7%
s-Monoacetylmorphine	2,000	100%
Morphine-6-β-D-glucuronide	2,000	100%
Thebaine	13,000	15.4%
Morphine 3-β-D-glucuronide	2,000	100%
6-Monoacetylmorphine (6-MAM)	1,500	133%
6-Acetylcodeine	10,000	20%
Oxycodone	>100,000	--
Procaine	>100,000	--
Norpropoxyphene	>100,000	--
Oxycodone (OXY)		

Oxycodone	100	100%
Ethyl Oxycodone	75,000	0.13%
Hydrocodone	5,000	2%
Hydromorphone	25,000	0.4%
Levorphanol tartrate	25,000	0.4%
Naloxone hydrochloride	10,000	1%
Naltrexone hydrochloride	50,000	0.2%
Oxymorphone	200	50%
Oxymorphone-3β-D-glucuronide	500	20%
Noroxycodone	1,500	6.7%
Noroxymorphone	3,000	3.3%
Dihydrocodeine	>100,000	--
Codeine	>100,000	--
Morphine	>100,000	--
Thebaine	>100,000	--
Buprenorphine	>100,000	--
Ethylmorphine	>100,000	--
6-acetylmorphine	>100,000	--
Phencyclidine (PCP)		
PCP (Phencyclidine)	25	100%
4-Hydroxyphencyclidine	12,500	0.2%
Propoxyphene (PPX)		
Propoxyphene	300	100%
Norpropoxyphene	300	100%
Nortriptyline (TCA)		
Nortriptyline	1,000	100%
Amitriptyline	1,500	66.7%
Chlorpheniramine	50,000	2%
Clomipramine	10,000	10%
Cyclobenzaprine Hydrochloride	5,000	20%
Desipramine	1,000	100%
Doxepine	2,000	50%
Duloxetine	10,000	10%
Imipramine	1,000	100%
Norclomipramine	12,500	8%
Nordoxepine	1,000	100%
Promazine	50,000	2%
Trimipramine	10,000	10%
Maprotiline	>100,000	--

Promethazine hydrochloride	>100,000	--
Marijuana (THC)		
(±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC	50	100%
11-nor-Δ8-THC -9-COOH	30	166.7%
(-)-11-nor-9-carboxy-Δ9-THC	50	100%
11-nor-Δ9-THC -carboxy glucuronide	100	50%
11-hydroxy-Δ9-Tetrahydrocannabinol	5,000	1%
Δ8- Tetrahydrocannabinol	1,300	3.8%
Δ9- Tetrahydrocannabinol	5,000	1%
Cannabinol	20,000	0.25%
Cannabidiol	>100,000	--
(±)-11-Hydroxy-Δ9-THC	>100,000	--
Tramadol (TRA or TML)		
Tramadol	100	100%
n-Desmethyl Tramadol	400	25%
o-Desmethyl Tramadol	1,000	10%
o-Desmethyl Venlafaxine	>10,000	--
Venlafaxine	>100,000	--

*Benzphetamine metabolizes to methamphetamine and amphetamine in the body, so a donor taking benzphetamine may produce positive results for AMP.

Precision/Reproducibility

The precision, reproducibility, and sensitivity of all twenty-two (22) drug screen tests available on the Henry Schein ONESTEP+ Urine Drug of Abuse Rapid Test Cup were determined over 25 days using 3 operators who conducted 2 runs per day across 3 lots of finished devices. The aliquots were masked to prevent the operators from knowing which aliquot contained what test solution. The test solutions were targeted to be drug-free, -75% of the assay cutoff, -50% of the assay cutoff, -25% of the assay cutoff, the cutoff itself, +25% of cutoff, +50% of the cutoff, +75% of the cutoff, and 200% of the cutoff.
Data obtained from testing indicated >99% correlation at +/-50%, +/-75%, 200% and drug-free of each assay.

Drugs	Concen- tration (ng/mL)	n	Lot1		Lot2		Lot3	
			-	+	-	+	-	+
6-Monoacetylmorphine	0	50	50	0	50	0	50	0
	2.5	50	50	0	50	0	50	0
	5	50	50	0	50	0	50	0
	7.5	50	49	1	48	2	48	2
	10	50	26	24	24	26	24	26
	12.5	50	2	48	2	48	1	49
	15	50	0	50	0	50	0	50
	17.5	50	0	50	0	50	0	50
	20	50	0	50	0	50	0	50

Amphetamine 500	0	50	50	0	50	0	50	0
	125	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	375	50	49	1	50	0	49	1
	500	50	23	27	24	26	25	25
	625	50	0	50	1	49	1	49
	750	50	0	50	0	50	0	50
	875	50	0	50	0	50	0	50
	1000	50	0	50	0	50	0	50
Amphetamine	0	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	750	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	23	27	25	25	26	24
	1250	50	0	50	0	50	0	50
	1500	50	0	50	0	50	0	50
	1750	50	0	50	0	50	0	50
	2000	50	0	50	0	50	0	50
Secobarbital	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	25	25	25	25	25	25
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Drugs	Concen- tration (ng/mL)	n	Lot1		Lot2		Lot3	
			-	+	-	+	-	+
Buprenorphine	0	50	50	0	50	0	50	0
	2.5	50	50	0	50	0	50	0
	5	50	50	0	50	0	50	0
	7.5	50	48	2	48	2	49	1
	10	50	26	24	27	23	24	26
	12.5	50	2	48	2	48	2	48
	15	50	0	50	0	50	0	50
	17.5	50	0	50	0	50	0	50
	20	50	0	50	0	50	0	50

Oxazepam	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	50	0	49	1	49	1
	300	50	26	24	22	28	24	26
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Benzoylecgonine	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	25	25	25	25	24	26
	375	50	1	49	0	50	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Benzoylecgonine150	0	50	50	0	50	0	50	0
	37.5	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	112.5	50	49	1	48	2	48	2
	150	50	25	25	22	28	23	27
	187.5	50	2	48	1	49	2	48
	225	50	0	50	0	50	0	50
	262.5	50	0	50	0	50	0	50
	300	50	0	50	0	50	0	50
EDDP	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	50	0
	300	50	24	26	24	26	23	27
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Norfentanyl	0	50	50	0	50	0	50	0
	1.25	50	50	0	50	0	50	0
	2.5	50	50	0	50	0	50	0
	3.75	50	48	2	48	2	48	2
	5	50	24	26	25	25	24	26
	6.25	50	2	48	1	49	2	48
	7.5	50	0	50	0	50	0	50
	8.75	50	0	50	0	50	0	50
	10	50	0	50	0	50	0	50

Methylenedioxy-methamphetamine	0	50	50	0	50	0	50	0
	125	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	375	50	50	0	50	0	49	1
	500	50	22	28	25	25	23	27
	625	50	1	49	0	50	1	49
	750	50	0	50	0	50	0	50
	875	50	0	50	0	50	0	50
	1000	50	0	50	0	50	0	50
Methamphetamine 500	0	50	50	0	50	0	50	0
	125	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	375	50	49	1	49	1	48	2
	500	50	24	26	25	25	25	25
	625	50	1	49	1	49	1	49
	750	50	0	50	0	50	0	50
	875	50	0	50	0	50	0	50
	1000	50	0	50	0	50	0	50
Methamphetamine	0	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	750	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	24	26	23	27	23	27
	1250	50	0	50	0	50	0	50
	1500	50	0	50	0	50	0	50
	1750	50	0	50	0	50	0	50
	2000	50	0	50	0	50	0	50
Methadone	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	23	27	24	26	25	25
	375	50	1	49	1	49	2	48
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Morphine	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	50	0	49	1	49	1
	300	50	25	25	24	26	24	26
	375	50	1	49	1	49	2	48
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50

Morphine2000	0	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	50	0	50	0	50	0
	1500	50	50	0	50	0	50	0
	2000	50	26	24	25	25	23	27
	2500	50	0	50	0	50	0	50
	3000	50	0	50	0	50	0	50
	3500	50	0	50	0	50	0	50
	4000	50	0	50	0	50	0	50
Oxycodone	0	50	50	0	50	0	50	0
	25	50	50	0	50	0	50	0
	50	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	49	1	49	1	49	1
	100	50	24	26	24	26	24	26
	125	50	2	48	1	49	1	49
	150	50	0	50	0	50	0	50
	175	50	0	50	0	50	0	50
	200	50	0	50	0	50	0	50
Phencyclidine	0	50	50	0	50	0	50	0
	6	50	50	0	50	0	50	0
	12.5	50	50	0	50	0	50	0
	19	50	48	2	48	2	49	1
	25	50	23	27	23	27	24	26
	31	50	2	48	1	49	1	49
	37.5	50	0	50	0	50	0	50
	44	50	0	50	0	50	0	50
	50	50	0	50	0	50	0	50
Drugs	Concentration (ng/mL)	n	Lot1		Lot2		Lot3	
			-	+	-	+	-	+
Propoxyphene	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	24	26	23	27	24	26
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50

Nortriptyline	0	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	750	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	24	26	24	26	24	26
	1250	50	0	50	0	50	0	50
	1500	50	0	50	0	50	0	50
	1750	50	0	50	0	50	0	50
	2000	50	0	50	0	50	0	50
11-nor-Δ9-THC-9-COOH	0	50	50	0	50	0	50	0
	12.5	50	50	0	50	0	50	0
	25	50	50	0	50	0	50	0
	37.5	50	48	2	49	1	49	1
	50	50	24	26	22	28	23	27
	62.5	50	1	49	1	49	2	48
	75	50	0	50	0	50	0	50
	87.5	50	0	50	0	50	0	50
	100	50	0	50	0	50	0	50
Tramadol	0	50	50	0	50	0	50	0
	25	50	50	0	50	0	50	0
	50	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	49	1	48	2	48	2
	100	50	24	26	25	25	26	24
	125	50	2	48	2	48	1	49
	150	50	0	50	0	50	0	50
	175	50	0	50	0	50	0	50
	200	50	0	50	0	50	0	50

Interference/Non-Cross-Reacting Compounds
The following compounds were evaluated for potential positive or negative interference with the Henry Schein ONESTEP+ Urine Drug of Abuse Rapid Test Cup. All compounds were dissolved in drug control solutions targeted to 50% below and 50% above their respective cutoff concentrations and tested on the Cup devices. An unaltered sample was used as control. No interference was found for the following compounds when tested at a concentration of 100 µg/mL (unless otherwise noted). All exceptions noted were positive results due to cross reactivity with the test and the specified drug.

(-) Cotineine	Diclofenac sodium	Nitroglycerin
3-Hydroxytyramine	Diffunisal	Norethindrone
7-Aminoclonazepam(except MDMA test)	Digoxin	Norpropoxyphene
7-Aminoflunitrazepam	Dimethyl-aminoantipyridine	Norpseudoephedrine
7-Aminonitrazepam	Diphenhydramine HCl	Nortriptyline(except TCA test)
Acetaminophen	Diphenylhydantoin	Noscapine
Acetone (1000 mg/dL)	Disopyramide	Octopamine
Acetophenetidin	Dopamine HCl	O-Hydroxyhippuric acid
Acetylsalicylic acid	Doxepine(except TCA test)	Olanzapine
Acyclovir	Doxylamine	Omeprazole
Albumin(100mg/dL)	D-Pseudoephedrine	Oxalic acid (100mg/dL)

Albuterol	Duloxetine(except TCA test)	Oxazepam (except BZO test)
Albuterol sulfate(Proair HFA)	Ecgonine methyl ester	Oxazepam Glucuronide(except BZO test)
Alpha Methadol	EMDP	Oxolinic acid
Aminophylline	Ephedrine hydrochloride(except MET test)	Oxymetazoline
Aminopyrine	Erythromycin	Paliperidone
Amitriptyline(except TCA test)	Esomeprazole Magnesium	Papaverine
Amlodipine besylate	Estradiol	Penicillin-G
Amobarbital(except BAR test)	Estrone	PenicillinV Potassium
Amoxicillin	Ethanol(1%)	Perphenazine
Ampicillin	Fenfluramine(except MET test)	Phenacetin
Apomorphine	Fenofibrate	Phencyclidine(except PCP test)
Aripiprazole	Fenoprofen	Phenelzine
Ascorbic acid	Fluoxetine Hydrochloride	Phenylethylamine
Aspartame	Fluphenazine	Phenobarbital(except BAR test)
Aspirin	Fotemustine	Phentermine(except AMP test)
Atomoxetine	Furosemide	Phenylpropanolamine
Atorvastatin Calcium	Gabapentin	Prednisone
Atropine	Galactose	Pregabalin
Azithromycin	Gatifloxacin	Procaine
Baclofen	Gemfibrozil	Promazine(except TCA test)
Benzilic acid	Gentisic acid	Promethazine
Benzocaine	Glucose(3000 mg/dL)	Propoxyphene(except PPX test)
Benzoic acid	Guaiacolglyceryl ether	Propranolol
Benzoylcegonine(except COC test)	Hemoglobin	Pseudoephedrine
Benzphetamine	Hexobarbital	Pyridoxine
Benzylpiperiazine	Hydralazine	Pyrilamine
Bilirubin	Hydrochlorothiazide	Pyrogallol
Boric Acid (1%)	Hydrocortisone	Quetiapine
Bromo-2,5,Dimethoxyphenet-hylamine	Hydroxybutyric Acid	Quinidine
Bupropion	Ibuprofen	Quinine
Caffeine	Imipramine(except TCA test)	Quinolinic Acid
Cannabidiol	Isoproterenol	Ranitidine
Captopril	Isoxsuprine	Riboflavin
Carbamazepine	Ketamine	Rifampicin
Carfentanil	Ketoprofen	Salicylic acid
Carisoprodol	LAAM HCl	Secobarbital(except BAR test)
Cefradine	Labetalol	Serotonin
Cephalexin	Lamotrigine	Serotonin (5- Hydroxytyramine)
Cetirizine	L-Ephedrine	Sertraline
Chloral hydrate	L-Epinephrine	Sildenafil Citrate

Chloramphenicol	Levofloxacin Hydrochloride	Simvastatin
Chlordiazepoxide(except BZO test)	Levonorgestrel	Sodium Azide
Chloroquine	Levothyroxine Sodium	Sulfamethazine
Chlorothiazide	Lidocaine Hydrochloride	Sulindac
Chlorpheniramine(except TCA test)	Lisinopril	Telmisartan
Chlorpromazine	Loperamide	Tetracycline
Cholesterol	Loratadine	Tetrahydrocortisone 3-(β-Dglucuronide)
Ciprofloxacin Hydrochloride	Lorazepam Glucuronide(except BZO test)	Tetrahydrocortisone, 3-acetate
Citalopram	L-phenylephrine	Tetrahydrozoline
Clarithromycin	LSD	THC (except THC test)
Clofibrate	L-thyroxine	Theophylline
Clomipramine(except TCA test)	Magnesium	Thiamine
Clonidine	Maprotiline	Thioridazine
Clozapine	Meperidine	Trazodone Hydrochloride
Conjugated Estrogens	Meprobamate	Triamterene
Cortisone	Metformin	Trifluoperazine
Creatine Hydrate	Methapyrilene	Trifluoromethylphenyl-pi-perazine
Creatinine	Methaqualone	Trimethobenzamide
Cyclobenzaprine(except TCA test)	Methoxyphenamine (except MET test)	Trimethoprim
Cyproheptadine	Methylphenidate	Tryptamine
D,L-Epinephrine	Metoprolol Tartrate	Tyramine (except AMP test)
D,L-Isoproterenol	Metronidazole	Urea (2000 mg/dL)
D,L-Lorazepam (except BZO test)	Mifepristone	Uric acid
D,L-Octopamine	N-Acetylprocainamide	Valproic acid (250 µg/mL)
D,L-Propranolol	NaCl (4000 mg/dL)	Venlafaxine HCl
D,L-Tryptophan	Nalidixic acid	Verapamil
D,L-Tyrosine	Naloxone hydrochloride(except OXY test)	Vitamin B2
Delorazepam	Naltrexone hydrochloride(except OXY test)	Vitamin C
Demoxepam(except BZO test)	Naproxen	Zaleplon
Deoxycorticosterone	N-desmethyl Tapentadol	Zolpidem
Desloratadine	Niacinamide	Zomepirac
Desipramine(except TCA test)	Nicotine	β-Estradiol
Dextromethorphan	Nicotinic Acid	γ-Cyclodextrin
Diclofenac	Nifedipine	γ-Globulin (500mg/dL)

BIBLIOGRAPHY/SUGGESTED READING

1. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 10th ed. Seal Beach, CA: Biomedical Pub

SYMBOL INDEX

	Do not reuse		See instruction for use		Expiration Date
	Tests per kit		Store between 2°C-30°(36°F-86°F)		Keep Dry
	Batch number		Catalog #		Keep away from Sunlight
	Unique Device Identifier		For in vitro diagnostic use only		

ASSISTANCE

If you have any questions regarding the use of this product, call Technical Support 1-866-982-3818 (Monday-Friday 8:30 a.m. to 5 p.m. CT).

Distributed by:
HENRY SCHEIN, INC.
135 DURYEA ROAD
Melville, NY 11747 USA
Made in China
REV.2025/04



RECIPIENTE DE PRUEBA RÁPIDA DE ORINA ONESTEP+ PARA DETECTAR ESTUPEFACIENTES

570-3927 570-3928

ES

Para uso médico y otros usos profesionales de diagnóstico in vitro.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso para un dispositivo de recipiente que consiste en cualquier combinación de ensayos para la detección de las siguientes drogas: 6-Monoacetilmorfina, D-anfetamina, Benzoilecgonina, Buprenorfina, EDDP, Norfentanilo, D/L-metadona, D-metanfetamina, D/L-metilendioximetanfetamina, Morfina, Nortriptilina, Oxazepam, Oxiconona, Fenciclidina, D-propoxifeno, Secobarbital, THC-COOH y Tramadol en orina humana.

USO PREVISTO

El recipiente de prueba rápida de orina ONESTEP+ para detectar estupefacientes de Henry Schein es un inmunoensayo rápido de flujo lateral diseñado para la detección cualitativa de 6-monoacetilmorfina, D-anfetamina, D/L-metilendioximetanfetamina, morfina, nortriptilina, oxazepam, oxiconona, fenciclidina, D-propoxifeno, secobarbital, THC-COOH y tramadol en orina humana. Las concentraciones de corte de las pruebas y los compuestos para los que están calibradas las pruebas son los siguientes:

Prueba	Calibrador	Corte (ng/mL)
6-MAM	6-Monoacetilmorfina	10
AMP	d-Anfetamina	500/1000
BAR	Secobarbital	300
BUP	Buprenorfina	10
BZO	Oxazepam	300
COC	Benzoilecgonina	150/300
EDDP	2-etilideno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina	300
FEM o FYL	Norfentanilo	5
MDMA	Metilendioximetanfetamina	500
MET	d-Metanfetamina	500/1000
MTD	Metadona	300
OPI	Morfina	300/2000
OXY	Oxiconona	100
PCP	Fenciclidina	25
PPX	d-propoxifeno	300
TCA	Nortriptilina	1000
THC	11-nor-Δ9-THC-COOH	50
TRA o TML	Tramadol	100

Los recipientes para pruebas únicas o múltiples pueden incluir hasta dieciocho (18) de los analitos mencionados anteriormente, en cualquier combinación, con o sin pruebas integradas de adulteración o validez de muestras (SVT). Las pruebas solo proporcionan un resultado preliminar. Debe utilizarse un método químico alternativo más específico para obtener un resultado positivo confirmado. Los métodos de confirmación preferidos son la cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC-MS), la cromatografía de líquidos/espectrometría de masas (LC-MS) y sus versiones de espectrómetro de masas en tándem. Se debe aplicar una cuidadosa consideración y juicio a cualquier resultado de una prueba de detección de drogas de abuso, sobre todo cuando se evalúan resultados preliminares positivos.

PRINCIPIO

El recipiente de prueba rápida de orina ONESTEP+ para detectar estupefacientes de Henry Schein es un inmunoensayo basado en el principio de unión competitiva. Las drogas que pueden estar presentes en la muestra de orina compiten contra su respectivo conjugado de la droga por los sitios de unión de su anticuerpo específico. Durante la prueba, una muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. Una droga, si está presente en la muestra de orina por debajo de la concentración de corte respectiva, no saturará los sitios de unión del anticuerpo específico recubierto en las partículas. Las partículas recubiertas de anticuerpos serán capturadas por el conjugado de droga inmovilizado y aparecerá una línea de color visible en la región de la línea de prueba

de la tira específica de la droga. La línea coloreada no se formará en el área de la línea de prueba si el nivel de droga está por encima de la concentración de corte correspondiente porque la droga saturará todos los sitios de unión del anticuerpo específico recubierto en las partículas.

Una muestra de orina positiva a drogas no generará una línea de color en el área de la línea de prueba específica de la tira debido a la competencia de las drogas, mientras que una muestra de orina negativo a drogas o una muestra que contenga una concentración de drogas por debajo del punto de corte generará una línea en el área de la línea de prueba. Para servir de control del procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en el área de la línea de control que indica que se ha añadido el volumen adecuado de muestra y se ha producido la absorción en la membrana.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Solo para uso diagnóstico in vitro.
- Trate todas las muestras y materiales de orina como si pudieran transmitir una infección. Utilice guantes y ropa de laboratorio adecuada para evitar el contacto de la piel con las muestras de orina. Deben establecerse métodos adecuados de manipulación y eliminación.
- No utilice el kit de prueba después de la fecha de caducidad.
- El dispositivo debe permanecer en la bolsa sellada hasta que esté listo para su uso.
- La prueba es de un solo uso. No reutilice la prueba.
- No toque la zona de prueba del vaso de prueba.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- El recipiente de prueba rápida de orina ONESTEP+ para detectar estupefacientes de Henry Schein debe conservarse a 2-30 °C (36-86 °F) en la bolsa original sellada. El dispositivo es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. No utilice el dispositivo después de la fecha de caducidad impresa en la bolsa.
- El dispositivo debe permanecer en la bolsa sellada hasta que esté listo para su uso; sin embargo, el dispositivo permanecerá estable hasta 1 hora después de su apertura.
- **No congelar. (Temperatura inferior a 0 °C [32 °F]).**

MATERIALES

Materiales proporcionados:

- Dispositivos de prueba (sellados individualmente en bolsa de aluminio)
- Instrucciones de uso
- Tarjeta de color de validez/adulteración de la muestra (si procede)
- Guantes desechables
- Tarjeta de procedimiento
- Etiquetas para precintos de seguridad

Materiales necesarios, pero no proporcionados:

- Temporizador, reloj de pared o de pulsera

RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS


- La orina fresca no requiere ningún tratamiento previo especial y la muestra puede recogerse en cualquier momento del día.
- Si la muestra no se analiza en las 24 horas siguientes a su recogida, puede refrigerarse [2-8 °C (36-46 °F)] durante un máximo de 7 días o congelarse a -20 °C (4 °F) durante un máximo de 1 año.
- Si están refrigeradas o congeladas, deje que el dispositivo de prueba, los controles y/o las muestras se equilibren a temperatura ambiente [15-30 °C (59-86 °F)] antes de la prueba.

INDICACIONES DE USO

No abra la bolsa del dispositivo de prueba hasta que la prueba esté lista para realizarse. El dispositivo debe utilizarse durante la hora siguiente a la apertura de la bolsa.

1. Extraiga el dispositivo de prueba de la bolsa precintada. Si su proceso lo requiere, escriba el nombre o la identificación del donante en la etiqueta, en el espacio previsto para ello. (Fig. 1)
2. Abra la tapa del vaso de prueba. Orine directamente en el recipiente de la prueba. Asegúrese de llenar el recipiente con la muestra de orina entre un nivel mínimo y un nivel máximo (marcados en el recipiente). (Fig. 2)
3. Una vez recogida la muestra de orina, cierre bien la tapa y devuelva el recipiente a un encargado de la recogida. (Fig. 3)
4. El encargado de la recogida deberá despegar la etiqueta para revelar el/los resultado(s) de la(s) prueba(s). (Fig. 4)
5. Interprete los resultados de las pruebas. (Fig. 5) Lea los resultados a los 5 minutos. **No interprete el resultado antes de 5 minutos ni después de 30 minutos.** Consulte la Fig. 5 del esquema de prueba para ver los posibles resultados de la prueba.

Nota: Los resultados negativos de la prueba pueden interpretarse tan pronto como aparezcan las líneas de Control y haya líneas de Prueba visibles, lo que suele ocurrir en 1 minuto. Los resultados positivos de las pruebas de detección de drogas deben leerse a los 5 minutos. Todos los resultados permanecen estables durante 30 minutos.

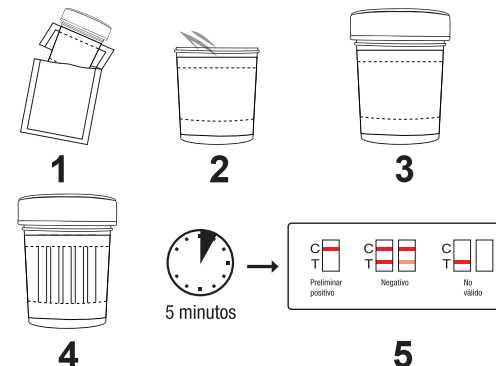

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

(Consulte la siguiente ilustración)

NEGATIVO: * Aparecen dos líneas. Una línea roja debe estar en el área de control (C) y otra línea roja o rosa debe estar adyacente al área de prueba (Droga/T). Este resultado negativo indica que no hay droga en la muestra o que la droga está presente, pero por debajo de la concentración de corte de la prueba.

***NOTA:** El tono de rojo en el área de la línea de prueba (Droga/T) puede variar, pero también debe considerarse negativo siempre que haya una línea rosa tenue.


PRELIMINAR POSITIVO: Aparece una línea roja en el área de control (C). No aparece ninguna línea en el área de prueba (Droga/T). Este resultado preliminar positivo indica que la muestra puede contener la droga en una concentración superior al nivel de corte de la prueba.

IMPORTANTE: Un resultado positivo en un análisis de drogas se denomina preliminar por una razón. Debe utilizarse un método químico alternativo más específico para obtener un resultado positivo confirmado.

NO VÁLIDO: La línea de control no aparece. Las razones más probables de que la línea de control sea errónea son un volumen de muestra insuficiente o unas técnicas de procedimiento incorrectas. Revise el procedimiento de prueba y repita la prueba utilizando un nuevo dispositivo de prueba. Si el problema persiste, deje de utilizar el lote inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico en el número de teléfono 1-866-982-3818.

Nota: La intensidad del color y el grosor de las líneas de prueba no tienen ningún significado atribuido.

Un resultado preliminar positivo no siempre significa que el donante haya consumido drogas ilegales, así como un resultado negativo no garantiza que el donante no las haya consumido. Diversos factores pueden afectar a la fiabilidad de las pruebas de detección de drogas.

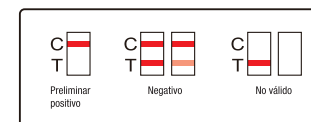

INTERPRETACIÓN DE ADULTERANTES

Los resultados semicuantitativos se obtienen mediante la comparación visual de los bloques de color reaccionados en la tira con los bloques impresos en la tarjeta de colores.

Consulte la tarjeta de colores suministrada con este kit para interpretar el resultado de adulteración. Lea las almohadillas de prueba de adulteración a los 2 minutos.

SIN ADULTERACIÓN	ADULTERACIÓN
OXI	[Color de referencia]
SG	[Color de referencia]
pH	[Color de referencia]
NIT	[Color de referencia]
GLUT	[Color de referencia]
CREA	[Color de referencia]

CONTROL DE CALIDAD

Cada tira reactiva lleva incorporado un control de procedimiento. Una línea roja que aparece en el área de control (C) es un control de procedimiento interno. Esta línea confirma un volumen de muestra suficiente, una absorción adecuada de la membrana y una técnica de procedimiento correcta.

Las normas de control externas no se suministran con este kit. No obstante, se recomienda realizar controles positivos y negativos como buena práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento de ensayo y verificar su correcto funcionamiento. Las pruebas de control de calidad deben realizarse con cada nuevo lote y cada nuevo operador. Cumpla las leyes y normativas locales, estatales y federales.

Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica en el teléfono 1-866-982-3818 para obtener información sobre los controles que funcionan con el dispositivo.

LIMITACIONES

- 1. El recipiente de prueba rápida de orina ONESTEP+ para detectar estupefacientes de Henry Schein solo proporciona un resultado analítico cualitativo y preliminar. Debe utilizarse un método químico alternativo más específico para obtener un resultado preliminar positivo confirmado. Los métodos de confirmación preferidos son la cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC-MS), la cromatografía de líquidos/espectrometría de masas (LC-MS) y sus versiones de espectrómetro de masas en tándem.
- 2. Existe la posibilidad de que errores técnicos o de procedimiento, así como otras sustancias que interfieran en la muestra de orina, puedan causar resultados incorrectos.
- 3. Las sustancias introducidas intencionadamente en la muestra, como la lejía o el peróxido, pueden producir resultados incorrectos, independientemente del método analítico utilizado.
- 4. Un resultado positivo no indica el nivel de intoxicación, la vía de administración ni la concentración de la droga en la muestra de orina.
- 5. Un resultado negativo no indica necesariamente que la orina esté exenta de drogas. Los resultados negativos son posibles si la concentración de la droga está por debajo del nivel de corte.
- 6. La prueba no distingue entre drogas de abuso y determinados medicamentos.
- 7. Puede obtenerse un resultado positivo a partir de determinados alimentos o complementos alimenticios.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

Precisión

El recipiente de prueba rápida de orina ONESTEP+ para detectar estupefacientes de Henry Schein se evaluó con 3 operadores y 80 muestras de orina clínica por operador. Las muestras fueron analizadas mediante LC-MS y por el recipiente de prueba rápida de orina ONESTEP+ para detectar estupefacientes de Henry Schein. Las muestras se dividieron por concentración en cinco categorías: exenta de drogas, menos de la mitad del punto de corte, cerca del punto de corte negativo, cerca del punto de corte positivo y alto positivo. Los resultados fueron los siguientes:

6-MAM

Resultados		6-MAM10		% de concordancia con LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operador A	Por encima de 10 ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 10 ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador B	Por encima de 10 ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 10 ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador C	Por encima de 10 ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 10 ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Precisión	96.25%		

Anfetamina (AMP500)

Resultados		AMP500		% de concordancia con LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operador A	Por encima de 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador B	Por encima de 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Operador C	Por encima de 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Anfetamina (AMP)

Resultados		AMP1000		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		
Operador B	Por encima de 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 1000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador C	Por encima de 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		

Secobarbital (BAR)

Resultados		BAR300		% de concordancia con LC-MS
Urines Sample		+	-	
Operador A	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador B	Por encima de 300ng/mL (+)	40	0	100.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	98.75%		
Operador C	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Buprenorfina (BUP)

Resultados		BUP10		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Precisión	95.00%		
Operador B	Por encima de 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador C	Por encima de 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Precisión	95.00%		

Oxazepam (BZO)

Resultados		BZO300		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	

Operador A	Por encima de 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador B	Por encima de 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador C	Por encima de 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		

Cocaína (COC150)

Resultados		COC150		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 150ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 150ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador B	Por encima de 150ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 150ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador C	Por encima de 150ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 150ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Cocaína (COC)

Resultados		COC300		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador B	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Precisión	96.25%		
Operador C	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

EDDP

Resultados		EDDP300		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Operador B	Por encima de 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador C	Por encima de 300ng/mL (+)	40	0	100.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	100.00%		

Norfentanilo (FEN or FYL)

Resultados		FYL5		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 5ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 5ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Precisión	96.25%		
Operador B	Por encima de 5ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 5ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador C	Por encima de 5ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 5ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Metanfetamina (MET500)

Resultados		MET500		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 500ng/mL (+)	40	0	100.00%
	Por debajo de 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	98.75%		
Operador B	Por encima de 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador C	Por encima de 500ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 500ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Metanfetamina (MET)

Resultados		MET100		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		
Operador B	Por encima de 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 1000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador C	Por encima de 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		

Metadona (MTD)

Resultados		MTD300		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador B	Por encima de 300ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	97.50%		
Operador C	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		

Opiáceos (OPI)

Resultados		OPI300		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador B	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		
Operador C	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Opiáceos (OPI2000)

Resultados		OPI2000		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 2000ng/mL (+)	40	0	100.00%
	Por debajo de 2000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	100.00%		
Operador B	Por encima de 2000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 2000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador C	Por encima de 2000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 2000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		

Oxicodona (OXY)

Resultados		OXY100		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	

Operador A	Por encima de 100ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador B	Por encima de 100ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador C	Por encima de 100ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		

Fenciclidina (PCP)

Resultados		PCP25		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 25ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 25ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador B	Por encima de 25ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 25ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador C	Por encima de 25ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 25ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Propoxifeno (PPX)

Resultados		PPX300		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		
Operador B	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador C	Por encima de 300ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 300ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		

Nortriptilina (TCA)

Resultados		TCA1000		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 1000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador B	Por encima de 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 1000ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Operador C	Por encima de 1000ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 1000ng/mL (-)	0	40	100.00%
	Precisión	98.75%		

Marihuana (THC)

Resultados		THC50		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 50ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 50ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador B	Por encima de 50ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 50ng/mL (-)	2	38	95.00%
	Precisión	95.00%		
Operador C	Por encima de 50ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 50ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		

Tramadol (TRA or TML)

Resultados		TML100		% de concordancia con LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Operador A	Por encima de 100ng/mL (+)	38	2	95.00%
	Por debajo de 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	96.25%		
Operador B	Por encima de 100ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		
Operador C	Por encima de 100ng/mL (+)	39	1	97.50%
	Por debajo de 100ng/mL (-)	1	39	97.50%
	Precisión	97.50%		

Especificidad analítica/Reactividad cruzada

La especificidad de cada ensayo se determinó mediante el análisis de soluciones artificiales elaboradas añadiendo a la orina exenta de drogas estándares certificados de compuestos químicamente relacionados o estructuralmente similares. La reactividad cruzada relativa (si existe) representa la concentración mínima necesaria para obtener un resultado similar al nivel de corte del ensayo.

Droga	Concentración (ng/ml)	% de reactividad cruzada
6-MAM		
6-Monoacetilmorfina (6-MAM)	10	100 %
6-acetilmorfina	10	100 %
Heroína	60	16,7 %
Morfina	75.000	0,01 %
s-Monoacetilmorfina	10	100 %
Normorfina	>100.000	--
Clorhidrato de nalorfina	>100.000	--
Hidrocodona	>100.000	--
Hidromorfona	>100.000	--

Clordiazepóxido	>100.000	--
Clobazam	>100.000	--
D-anfetamina	>100.000	--
(±)-Anfetamina	>100.000	--
Tartrato de levorfanol	>100.000	--
Codeína	>100.000	--
Etilmorfina	>100.000	--
3-β-D-glucurónido de morfina	>100.000	--
Norcodeína	>100.000	--
Oxicodona	>100.000	--
Oximorfona	>100.000	--
Clorhidrato de procaina	>100.000	--
Tebaína	>100.000	--
6-Acetilcodeína	>100.000	--
Buprenorfina	>100.000	--
Dihidrocódeína	>100.000	--
Dextrometorfano	>100.000	--
Clorhidrato de imipramina	>100.000	--
Meperidina	>100.000	--
(±)-Metadona	>100.000	--
Mitraginina (kratom)	>100.000	--
Morfina-6-β-D-glucurónido	>100.000	--
Clorhidrato de naloxona	>100.000	--
Clorhidrato de naltrexona	>100.000	--
Naproxeno	>100.000	--
Norbuprenorfina	>100.000	--
Norbuprenorfina-3-D-glucurónido	>100.000	--
Clorhidrato de noroxicodona	>100.000	--
Clorhidrato de noroximorfona	>100.000	--
(+)-Maleato de norpropoxifeno	>100.000	--
Oximorfona-3β-D-glucurónido	>100.000	--
Clorhidrato de tapentadol	>100.000	--
Clorhidrato de tramadol	>100.000	--
Anfetamina (AMP500)		
D-anfetamina	500	100 %
Hidroxianfetamina	4.000	12,5 %
(+/-) -Metilendioxianfetamina (MDA)	200	250 %
D,L-anfetamina	500	100 %
Dietilestilbestrol	2.500	20 %
L-Anfetamina	25.000	2 %
Fentermina	4.000	12,5 %

β-Feniletilamina	50.000	1 %
Tiramina	50.000	1 %
p-Hidroxinorefedrina	50.000	1 %
p-Hidroxianfetamina	50.000	1 %
D,L-Norefedrina	50.000	1 %
(+/-) 3,4-metilendioxi-n-		
etilanfetamina (MDEA)	100.000	0,5 %
d-Metanfetamina	>100.000	--
l-Methamfetamina	>100.000	--
(+/-) 3,4-metilendioximetanfetamina		
(MDMA)	>100.000	--
Clorhidrato de efedrina	>100.000	--
Fenilpropanolamina	>100.000	--
Benzfetamina *	>100.000	--
L-Efedrina	>100.000	--
L-Epinefrina	>100.000	--
D,L-Epinefrina	>100.000	--
Anfetamina (AMP)		
D-anfetamina	1.000	100 %
Hidroxianfetamina	8000	12,5 %
(+/-) -Metilendioxianfetamina (MDA)	400	250 %
D,L-anfetamina	1.000	100 %
Dietilestilbestrol	5.000	20 %
L-Anfetamina	50.000	2 %
Fentermina	8.000	12,5 %
β-Feniletilamina	100.000	1 %
Tiramina	100.000	1 %
p-Hidroxinorefedrina	100.000	1 %
D,L-Norefedrina	100.000	1 %
p-Hidroxianfetamina	100.000	1 %
D-Metanfetamina	>100.000	--
L-Metanfetamina	>100.000	--
Clorhidrato de efedrina	>100.000	--
(+/-) 3,4-Metilendioximetanfetamina		
(MDMA)	>100000	--
Fenilpropanolamina	>100.000	--
Benzfetamina *	>100.000	--
L-Efedrina	>100.000	--
L-Epinefrina	>100.000	--
D,L-Epinefrina	>100.000	--
(+/-) 3,4-Metilendioxi-etilanfetamina (MDEA)	>100.000	--

Secobarbital (BAR)		
Secobarbital	300	100 %
Alfenal	150	200 %
Amobarbital	300	100 %
Aprobarbital	250	120 %
Butabarbital	2.500	12 %
Butethal	100	300 %
Ciclopentobarbital	600	50 %
Pentobarbital	250	120 %
Fenobarbital	250	120 %
Butalbital	2.500	12 %
Buprenorfina (BUP)		
Buprenorfina	10	100 %
-3-D-glucurónico de buprenorfina	160	6,25 %
Norbuprenorfina	10	100 %
Norbuprenorfina-3-D-glucurónico	200	5 %
Morfina	>100.000	--
Oximorfona	>100.000	--
Hidromorfona	>100.000	--
Oxazepam (BZO)		
Oxazepam	300	100 %
a-Hidroxiaprazolam	1.260	23,8 %
Alprazolam	200	150 %
Bromazepam	1.560	19,2 %
Clordiazepóxido	1.560	19,2 %
Clobazam	100	300 %
Clonazepam	2.500	12 %
Clorazepato dipotásico	200	150 %
Desalkylflurazepam	400	75 %
Diazepam	200	150 %
Estazolam	2.500	12 %
Flunitrazepam	400	75 %
D,L-Lorazepam	1.560	19,2 %
Midazolam	12.500	2,4 %
Nitrazepam	100	300 %
Nor-clordiazepóxido	200	150 %
Nordiazepam	400	75 %
Glucurónico de oxazepam	500	60 %
R,S-Lorazepam glucurónico	160	187,5 %

Temazepam	100	300 %
Triazolam	2.500	12 %
Demoxepam	2.000	15 %
Flurazepam	500	60 %
Delorazepam	>100.000	--
Cocaína (COC150)		
Benzoilecogonina	150	100 %
Cocaetileno	150	100 %
Clorhidrato de cocaína	150	100 %
Ecgonine	25.000	0,6 %
Norcocaína	50.000	0,3 %
Éster metílico de ecgonina	>100.000	--
Cocaína (COC)		
Benzoilecogonina	300	100 %
Cocaetileno	300	100 %
Clorhidrato de cocaína	300	100 %
Ecgonine	50.000	0,6 %
Norcocaína	100.000	0,3 %
Éster metílico de ecgonina	>100.000	--
EDDP		
Perclorato de EDDP	300	100 %
Metadona	>100.000	--
EMDP	>100.000	--
Doxilamina	>100.000	--
Disopiramida	>100.000	--
Clorhidrato de LAAM (Levo-alfa-acetil-metadol)	>100.000	--
Alfametadol	>100.000	--
Norfentanilo (FEN o FYL)		
Norfentanilo	5	100 %
Fentanilo	10	50 %
Acetilfentanilo	150	3,3 %
Acetilmorfentanilo	200	2,5 %
(±) Clorhidrato de β-hidroxiotiofentanilo	2.500	0,2 %
Acrilfentanilo	2.500	0,2 %
Butirifentanilo	5.000	0,1 %
Cis-d, l 3-metilfentanilo	50.000	0,01 %
Furanilfentanilo	10.000	0,05 %

Parafluorobutirilfentanilo (P-FBF)	80.000	0,01%
Parafluorofentanilo	40.000	0,005 %
9-Hidroxi-risperidona	10.000	0,05 %
Alfentanilo	20.000	0,03 %
Isobutirilfentanilo	5.000	0,1 %
Oxalato de norcarfentilo	50.000	0,01 %
Remifentanilo	15.000	0,03 %
Valerilfentanilo	20.000	0,03 %
Tienilfentanilo	50	10 %
Trans-d, l 3-metilfentanilo	50	10 %
4-Fluoro-isobutirilfentanilo	>20.000	--
Despropionilfentanilo (4-ANPP)	>20.000	--
MT-45	>100.000	--
Ocfentanilo	>100.000	--
Risperidona	>100.000	--
Sufentanilo	>100.000	--
Oxalato de carfentanilo	>10.000	--
Clorhidrato de labetalol	>100.000	--
Trazodona	>100.000	--
U-47700	>100.000	--
ω-1-Hidroxi-fentanilo	>20.000	--
Para compuestos opiáceos		
6-Acetilmorfina	>100.000	--
Anfetamina	>100.000	--
Buprenorfina	>100.000	--
-3-D-glucurónico de buprenorfina	>100.000	--
Codeína	>100.000	--
Dextrometorfano	>100.000	--
Dihidrocodeína	>100.000	--
EDDP	>100.000	--
EMDP	>100.000	--
Fluoxetina	>100.000	--
Heroína	>100.000	--
Hidrocodona	>100.000	--
Hidromorfona	>100.000	--
Ketamina	>100.000	--
Tartrato de levorfanol	>100.000	--
Meperidina	>100.000	--
Metadona	>100.000	--
Morfina	>100.000	--
Morfina-3-β-D-glucurónico	>100.000	--
Clorhidrato de naloxona		

clorhidrato clorhidrato clorhidrato	>100.000	--
Clorhidrato de naltrexona	>100.000	--
Norbuprenorfina	>100.000	--
Norcodeína	>100.000	--
Norketamina	>100.000	--
Normeperidina	>100.000	--
Normorfina	>100.000	--
Noroxicodona	>100.000	--
Oxicodona	>100.000	--
Oximorfona	>100.000	--
Pentazocina (Talwin)	>100.000	--
Pipamperona	>100.000	--
Clorhidrato de tapentadol	>100.000	--
Tioridazina	>100.000	--
Tilidina	>100.000	--
Tramadol	>100.000	--
o-Desmetiltramadol	>100.000	--
n-Desmetiltramadol	>100.000	--
Metilendioximetanfetamina (MDMA)		
(±) -MDMA	500	100 %
(+/-) 3,4-metilendioxi-n-etilanfetamina	3	
etilanfetamina (MDEA)	300	166,7 %
(+/-) -Metilendioxianfetamina (MDA)	3.000	16,7 %
L-Metanfetamina	50.000	1 %
7-Aminoclonazepam	100.000	0,5 %
d-Metaanfetamina	>100.000	--
d-Anfetamina	>100.000	--
l-Anfetamina	>100.000	--
Metanfetamina (MET500)		
D-Metanfetamina	500	100 %
(+/-) 3,4-metilendioxi-n-etilanfetamina		
(MDEA)	10.000	5 %
(±) -MDMA	1.250	40 %
L-Metanfetamina	12.500	4 %
Fenfluramina	25.000	2 %
p-Hidroximetanfetamina	5.000	10 %
D,L-Metanfetamina	500	100 %
β-Feniletilamina	25.000	2 %
Mefentermina	25.000	2 %
Clorhidrato de metoxifenamina	25.000	2 %

L-Anfetamina	40.000	1,25 %
Clorhidrato de efedrina	100.000	0,5 %
(1R,2S)-(-)-Efedrina	100.000	0,5 %
D-anfetamina	>100.000	--
Cloroquina	>100.000	--
(+/-) 3,4-Metilendioxianfetamina (MDA)	>100.000	--
L-Fenilefrina	>100.000	--
Trimetobenzamida	>100.000	--
Clorhidrato de procaina	>100.000	--
d/l-Anfetamina	>100.000	--
Metanfetamina (MET)		
D-Metanfetamina	1.000	100 %
(+/-) 3,4-metilendioxi-n-etilanfetamina		
(MDEA)	20.000	5 %
(+/-) 3,4-metilendioximetanfetamina		
(MDMA)	2.500	40 %
L-Metanfetamina	25.000	4 %
Fenfluramina	50.000	2 %
p-Hidroximetanfetamina	10.000	10 %
D,L-Metanfetamina	1.000	100 %
β-Feniletilamina	50.000	2 %
Mefentermina	50.000	2 %
Clorhidrato de metoxifenamina	50.000	2 %
L-Anfetamina	75.000	1,33 %
D-anfetamina	>100.000	--
D,L-anfetamina	>100.000	--
Cloroquina	>100.000	--
Clorhidrato de efedrina	>100.000	--
(+/-) 3,4-metilendioxianfetamina (MDA)	>100.000	--
Trimetobenzamida	>100.000	--
l-fenilefrina	>100.000	--
(1R,2S)-(-)-Efedrina	>100.000	--
Clorhidrato de procaina	>100.000	--
Metadona (MTD)		
(±)-Metadona	300	100 %
EDDP	>100.000	--
EMDP	>100.000	--
LAAM	>100.000	--
Alfametadol	>100.000	--
Doxilamina	>100.000	--

Opiáceos (OPI)		
Morfina	300	100 %
6-acetilmorfina	400	75 %
Codeína	300	100%
Dihidrocodeína	1.000	30 %
Etilmorfina	100	300 %
Heroína	600	50 %
Hidrocodona	500	60 %
Hidromorfona	1.000	30 %
Tartrato de levorfanol	10.000	3 %
Clorhidrato de nalorfina	50.000	0,6 %
Tebaina	6.240	4,8 %
s-Monoacetilmorfina	300	100 %
3-β-D-glucurónido de morfina	1.000	30 %
6-Monoacetilmorfina (6-MAM)	150	200 %
6-β-glucurónido de codeína	150	200 %
Morfina-6-β-D-glucurónido	150	200 %
6-Acetilcodeína	900	33,3 %
Normorfina	>100.000	--
Oxicodona	>100.000	--
Oximorfona	>100.000	--
Norcodeína	>100.000	--
Procaina	>100.000	--
Norpropoxifeno	>100.000	--
Opiáceos (OPI2000)		
Morfina	2.000	100 %
6-acetilmorfina	2.500	80 %
Codeína	1.000	200 %
Dihidrocodeína	1.500	133,3 %
Etilmorfina	2.500	80 %
6-β-glucurónido de codeína	2.500	80 %
Heroína	5.000	40 %
Hidrocodona	5.000	40 %
Hidromorfona	2.500	80 %
Tartrato de levorfanol	10.000	20 %
Clorhidrato de nalorfina	5.000	40 %
Norcodeína	4.000	50 %
Normorfina	5.000	40 %
Oximorfona	75.000	2,7 %
s-Monoacetilmorfina	2.000	100 %

Morfina-6-β-D-glucurónido	2.000	100 %
Tebaina	13.000	15,4 %
3-β-D-glucurónido de morfina	2.000	100%
6-Monoacetilmorfina (6-MAM)	1.500	133 %
6-Aceticodeína	10.000	20 %
Oxicodona	>100.000	--
Procaína	>100.000	--
Norpropoxifeno	>100.000	--
Oxicodona (OXY)		
Oxicodona	100	100 %
Etil oxicodona	75.000	0,13 %
Hidrocodona	5.000	2 %
Hidromorfona	25.000	0,4 %
Tartrato de levorfanol	25.000	0,4 %
Clorhidrato de naloxona	10.000	1 %
Clorhidrato de naltrexona	50.000	0,2 %
Oximorfona	200	50 %
Oximorfona-3β-D-glucurónido	500	20 %
Noroxicodona	1.500	6,7 %
Noroximorfona	3.000	3,3 %
Dihidrocodeína	>100.000	--
Codeína	>100.000	--
Morfina	>100.000	--
Tebaina	>100.000	--
Buprenorfina	>100.000	--
Etilmorfina	>100.000	--
6-acetilmorfina	>100.000	--
Fenciclidina (PCP)		
PCP (fenciclidina)	25	100 %
4-Hidroxifenciclidina	12.500	0,2 %
Propoxifeno (PPX)		
Propoxifeno	300	100 %
Norpropoxifeno	300	100 %
Nortriptilina (ATC)		
Nortriptilina	1.000	100 %
Amitriptilina	1.500	66,7 %
Clorfeniramina	50.000	2 %
Clomipramina	10.000	10 %

Clorhidrato de ciclobenzaprina	5.000	20 %
Desipramina	1.000	100 %
Doxepina	2.000	50 %
Duloxetina	10.000	10 %
Imipramina	1.000	100 %
Norclomipramina	12.500	8 %
Nordoxepina	1.000	100 %
Promazina	50.000	2 %
Trimipramina	10.000	10 %
Maprotilina	>100.000	--
Clorhidrato de prometazina	>100.000	--
Marihuana (THC)		
(±) -11-nor-9-carboxy-Δ9-THC	50	100 %
11-nor-Δ8-THC-9-COOH	30	166,7 %
(-) -11-nor-9-carboxy-Δ9-THC	50	100 %
11-nor-Δ9-THC-carboxi-glucurónido	100	50 %
11-hidroxi-Δ9-Tetrahidrocannabinol	5.000	1 %
Δ8-Tetrahidrocannabinol	1.300	3,8 %
Δ9-Tetrahidrocannabinol	5.000	1 %
Cannabinol	20.000	0,25 %
Cannabidiol	>100.000	--
(±) -11-Hidroxy-Δ9-THC	>100.000	--
Tramadol (TRA o TML)		
Tramadol	100	100 %
n-Desmetiltramadol	400	25 %
o-Desmetiltramadol	1.000	10 %
o-Desmetilvenlafaxina	>10.000	--
Venlafaxina	>100.000	--

*La benzfetamina se metaboliza en metanfetamina y anfetamina en el organismo, por lo que un donante que tome benzfetamina puede producir resultados positivos en AMP.

Precisión/Reproducibilidad

La precisión, reproducibilidad y sensibilidad de las veintidós (22) pruebas de detección de drogas disponibles en El recipiente de prueba rápida de orina ONESTEP+ para detectar estupefacientes de Henry Schein se determinaron durante 25 días utilizando 3 operadores que realizaron 2 series por día con los 3 lotes de dispositivos terminados. Las alícuotas se etiquetaron de forma anónima para impedir que los operadores identificaran qué solución de ensayo contenía cada una. El objetivo de las soluciones de ensayo era que estuvieran exentas de drogas al -75 %, al -50 % y al -25 % del punto de corte del ensayo, al propio punto de corte, al +25 %, al +50 %, al +75 % y al 200 % del punto de corte. Los datos obtenidos de las pruebas mostraron una correlación superior al 99 % en ±50 %, ±75 %, 200 % y en condiciones exentas de droga para cada ensayo.

Drogas/fármacos	Concen- tración (ng/mL)	n	Lot1		Lot2		Lot3	
				+	-	+	-	+
6-Monoacetilmorfina	0	50	50	0	50	0	50	0
	2.5	50	50	0	50	0	50	0
	5	50	50	0	50	0	50	0
	7.5	50	49	1	48	2	48	2
	10	50	26	24	24	26	24	26
	12.5	50	2	48	2	48	1	49
	15	50	0	50	0	50	0	50
	17.5	50	0	50	0	50	0	50
	20	50	0	50	0	50	0	50
Anfetamina 500	0	50	50	0	50	0	50	0
	125	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	375	50	49	1	50	0	49	1
	500	50	23	27	24	26	25	25
	625	50	0	50	1	49	1	49
	750	50	0	50	0	50	0	50
	875	50	0	50	0	50	0	50
	1000	50	0	50	0	50	0	50
Anfetamina	0	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	750	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	23	27	25	25	26	24
	1250	50	0	50	0	50	0	50
	1500	50	0	50	0	50	0	50
	1750	50	0	50	0	50	0	50
	2000	50	0	50	0	50	0	50
Secobarbital	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	25	25	25	25	25	25
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Drogas/fármacos	Concen- tration (ng/mL)	n	Lot1		Lot2		Lot3	
				+	-	+	-	+

Buprenorfina	0	50	50	0	50	0	50	0
	2.5	50	50	0	50	0	50	0
	5	50	50	0	50	0	50	0
	7.5	50	48	2	48	2	49	1
	10	50	26	24	27	23	24	26
	12.5	50	2	48	2	48	2	48
	15	50	0	50	0	50	0	50
	17.5	50	0	50	0	50	0	50
	20	50	0	50	0	50	0	50
Oxazepam	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	50	0	49	1	49	1
	300	50	26	24	22	28	24	26
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Benzoilecgonina	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	25	25	25	25	24	26
	375	50	1	49	0	50	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Benzoylecgonina 150	0	50	50	0	50	0	50	0
	37.5	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	112.5	50	49	1	48	2	48	2
	150	50	25	25	22	28	23	27
	187.5	50	2	48	1	49	2	48
	225	50	0	50	0	50	0	50
	262.5	50	0	50	0	50	0	50
	300	50	0	50	0	50	0	50
EDDP	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	50	0
	300	50	24	26	24	26	23	27
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50

Norfentanilo	0	50	50	0	50	0	50	0
	1.25	50	50	0	50	0	50	0
	2.5	50	50	0	50	0	50	0
	3.75	50	48	2	48	2	48	2
	5	50	24	26	25	25	24	26
	6.25	50	2	48	1	49	2	48
	7.5	50	0	50	0	50	0	50
	8.75	50	0	50	0	50	0	50
	10	50	0	50	0	50	0	50
Metilendioximetanfetamina	0	50	50	0	50	0	50	0
	125	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	375	50	50	0	50	0	49	1
	500	50	22	28	25	25	23	27
	625	50	1	49	0	50	1	49
	750	50	0	50	0	50	0	50
	875	50	0	50	0	50	0	50
	1000	50	0	50	0	50	0	50
Metanfetamina 500	0	50	50	0	50	0	50	0
	125	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	375	50	49	1	49	1	48	2
	500	50	24	26	25	25	25	25
	625	50	1	49	1	49	1	49
	750	50	0	50	0	50	0	50
	875	50	0	50	0	50	0	50
	1000	50	0	50	0	50	0	50
Metanfetamina	0	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	750	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	24	26	23	27	23	27
	1250	50	0	50	0	50	0	50
	1500	50	0	50	0	50	0	50
	1750	50	0	50	0	50	0	50
	2000	50	0	50	0	50	0	50
Metadona	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	23	27	24	26	25	25
	375	50	1	49	1	49	2	48
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50

Morfina	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	50	0	49	1	49	1
	300	50	25	25	24	26	24	26
	375	50	1	49	1	49	2	48
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Morfina 2000	0	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	50	0	50	0	50	0
	1500	50	50	0	50	0	50	0
	2000	50	26	24	25	25	23	27
	2500	50	0	50	0	50	0	50
	3000	50	0	50	0	50	0	50
	3500	50	0	50	0	50	0	50
	4000	50	0	50	0	50	0	50
Oxicodona	0	50	50	0	50	0	50	0
	25	50	50	0	50	0	50	0
	50	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	49	1	49	1	49	1
	100	50	24	26	24	26	24	26
	125	50	2	48	1	49	1	49
	150	50	0	50	0	50	0	50
	175	50	0	50	0	50	0	50
	200	50	0	50	0	50	0	50
Fenciclidina	0	50	50	0	50	0	50	0
	6	50	50	0	50	0	50	0
	12.5	50	50	0	50	0	50	0
	19	50	48	2	48	2	49	1
	25	50	23	27	23	27	24	26
	31	50	2	48	1	49	1	49
	37.5	50	0	50	0	50	0	50
	44	50	0	50	0	50	0	50
	50	50	0	50	0	50	0	50
Drogas/fármacos	Concen- tration (ng/mL)	n	Lot1		Lot2		Lot3	
			-	+	-	+	-	+

Propoxifeno	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	24	26	23	27	24	26
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Nortriptilina	0	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	750	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	24	26	24	26	24	26
	1250	50	0	50	0	50	0	50
	1500	50	0	50	0	50	0	50
	1750	50	0	50	0	50	0	50
	2000	50	0	50	0	50	0	50
11-nor-Δ9-THC-9-COOH	0	50	50	0	50	0	50	0
	12.5	50	50	0	50	0	50	0
	25	50	50	0	50	0	50	0
	37.5	50	48	2	49	1	49	1
	50	50	24	26	22	28	23	27
	62.5	50	1	49	1	49	2	48
	75	50	0	50	0	50	0	50
	87.5	50	0	50	0	50	0	50
	100	50	0	50	0	50	0	50
Tramadol	0	50	50	0	50	0	50	0
	25	50	50	0	50	0	50	0
	50	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	49	1	48	2	48	2
	100	50	24	26	25	25	26	24
	125	50	2	48	2	48	1	49
	150	50	0	50	0	50	0	50
	175	50	0	50	0	50	0	50
		50	0	50	0	50	0	50

Interferencia/Compuestos sin reacción cruzada
Se evaluó la posible interferencia positiva o negativa de los siguientes compuestos con el recipiente de prueba rápida de orina OONESTEP+ para detectar estupefácientes de Henry Schein. Todos los compuestos se disolvieron en soluciones de control de drogas dirigidas un 50 % por debajo y un 50 % por encima de sus concentraciones de corte correspondientes y se probaron en los dispositivos de recipiente. Como control se utilizó una muestra inalterada. No se encontraron interferencias para los siguientes compuestos cuando se probaron a una concentración de 100 µg/ mL (a menos que se indique lo contrario). Todas las excepciones observadas fueron resultados positivos debidos a la reactividad cruzada con la prueba y la droga/fármaco especificados.

(-) Cotinina	Diclofenaco sódico	Nitroglicerina
3-Hidroxitiramina	Diflunisal	Noretindrona
7-Aminoclonazepam (excepto prueba de MDMA)	Digoxina	Norpropoxifeno
7-Aminoflunitrazepam	Dimetil-aminoantipirina	Norpseudoefedrina
7-Aminonitrazepam	Difenhidramina HCl	Nortriptilina (excepto prueba de ATC)
Acetaminofeno	Difenilhidantoína	Noscapine
Acetona (1000 mg/dL)	Disopiramida	Octopamina
Acetofenetidina	Dopamina HCl	Ácido O-hidroxihipúrico
Ácido acetilsalicílico	Doxepina (excepto prueba de ATC)	Olanzapina
Aciclovir	Doxilamina	Omeprazol
Albumina (100mg/dL)	D-Pseudoefedrina	Ácido oxálico (100 mg/dL)
Albuterol	Duloxetina (excepto prueba de ATC)	Oxazepam (excepto prueba de BZO)
Sulfato de albuterol (ProAir HFA)	Éster metílico de ecgonina	Glucurónico de oxazepam (excepto prueba de BZO)
Alfametadol	EMDP	Ácido oxolínico
Aminofilina	Clorhidrato de efedrina (excepto prueba de MET)	Oximetazolina
Aminopirina	Eritromicina	Paliperidona
Amitriptilina (excepto prueba de ATC)	Esomeprazol magnesio	Papaverina
Amlodipino besilato	Estradiol	Penicilina-G
Amobarbital (excepto prueba de BAR)	Estrona	Penicilina V potásica
Amoxicilina	Etanol (1 %)	Perfenazina
Ampicilina	Fenfluramina (excepto prueba de MET)	Fenacetina
Apomorfina	Fenofibrato	Fenciclidina (excepto prueba de PCP)
Aripiprazol	Fenoprofeno	Fenelzina
Ácido ascórbico	Clorhidrato de fluoxetina	Feniletilamina
Aspartamo	Flufenazina	Fenobarbital (excepto prueba de BAR)
Aspirina	Fotemustina	Fentermina (excepto prueba AMP)
Atomoxetina	Furosemida	Fenilpropanolamina
Atorvastatina cálcica	Gabapentina	Prednisona
Atropina	Galactosa	Pregablina
Azitromicina	Gatifloxacina	Procaina
Baclofeno	Gemfibrozilo	Promazina (excepto prueba de ATC)
Ácido bencilico	Ácido gentsico	Prometazina
Benzocaína	Glucosa (3000 mg/dL)	Propoxifeno (excepto prueba de PPX)
Ácido benzoico	Éter guayacol glicerilo	Propranolol

Benzoilecgonina (excepto prueba de COC)	Hemoglobina	Pseudoefedrina
Benzfetamina	Hexobarbital	Piridoxina
Bencilpiperiazina	Hidralazina	Pirilamina
Bilirubina	Hidroclorotiazida	Pirogalol
Ácido bórico (1 %)	Hidrocortisona	Quetiapina
Bromo-2,5-dimetoxifeneto-hilamina	Ácido hidroxibutírico	Quinidina
Bupropión	Ibuprofeno	Quinina
Cafeína	Imipramina (excepto prueba de ATC)	Ácido quinolinico
Cannabidiol	Isoproterenol	Ranitidina
Captopril	Isoxsuprina	Riboflavina
Carbamazepina	Ketamina	Rifampicina
Carfentanilo	Ketoprofeno	Ácido salicílico
Carisoprodol	LAAM HCl	Secobarbital (excepto prueba de BAR)
Cefradina	Labetalol	Serotonina
Cefalexina	Lamotrigina	Serotonina (5-hidroxitiramina)
Cetirizina	L-Efedrina	Sertralina
Hidrato de cloral	L-Epinefrina	Citrato de sildenafilo
Cloranfenicol	Clorhidrato de levofloxacino	Simvastatina
Clordiazepóxido (excepto prueba de BZO)	Levonorgestrel	Azida sódica
Cloroquina	Levotiroxina sódica	Sulfametazina
Clorotiazida	Clorhidrato de lidocaína	Sulindac
Clorfeniramina (excepto prueba de ATC)	Lisinopril	Telmisartán
Clorpromazina	Loperamida	Tetraciclina
Colesterol	Loratadina	3-(β-glucurónico) de tetrahydro-cortisona
Clorhidrato de ciprofloxacino	Glucurónico de lorazepam (excepto prueba BZO)	Tetrahydrocortisona, 3-acetato
Citalopram	L-Fenilefrina	Tetrahidrozolina
Claritromicina	LSD	THC (excepto prueba de THC)
Clofibrato	L-Tiroxina	Teofilina
Clomipramina (excepto prueba de ATC)	Magnesio	Tiamina
Clonidina	Maprotilina	Tioridazina
Clozapina	Meperidina	Clorhidrato de trazodona
Estrógenos conjugados	Meprobamato	Triamtereno
Cortisona	Metformina	Trifluoperazina
Hidrato de creatina	Metapirileno	Trifluorometilfenilpiperazina
Creatinina	Metacualona	Trimetobenzamida
Ciclobenzaprina (excepto prueba de ATC)	Metoxifenamina (excepto prueba de MET)	Trimetoprima

Ciproheptadina	Metilfenidato	Triptamina
D,L-Epinefrina	Tartrato de metoprolol	Tiramina (excepto prueba de AMP)
D,L-Isoproterenol	Metronidazol	Urea (2000 mg/dL)
D,L-Lorazepam (excepto prueba de BZO)	Mifepristona	Ácido úrico
D,L-Octopamina	N-acetilprocainamida	Ácido valproico (250 µg/mL)
D,L-Propranolol	NaCl (4000 mg/dL)	Clorhidrato de venlafaxina
D,L-triptófano	Ácido nalidixico	Verapamil
D,L-Tirosina	Clorhidrato de naloxona (excepto prueba de OXY)	Vitamina B2
Delorazepam	Clorhidrato de naltrexona (excepto prueba de OXY)	Vitamina C
Demoxepam (excepto prueba de BZO)	Naproxeno	Zaleplon
Deoxicorticosterona	N-desmetil Tapentadol	Zolpidem
Desloratadina	Niacinamida	Zomepirac
Desipramina (excepto prueba de ATC)	Nicotina	β-Estradiol
Dextrometorfano	Ácido nicotínico	γ-Ciclodextrina
Diclofenaco	Nifedipina	γ-Globulina (500 mg/dL)

BIBLIOGRAFÍA/LECTURA RECOMENDADA

1. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 10th ed. Seal Beach, CA: Biomedical Pub.

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	No reutilizar		Fecha de caducidad		Fecha de caducidad
	Pruebas por kit		Conservar en un lugar seco		Conservar en un lugar seco
	Número de lote		Mantener alejado de la luz solar		Mantener alejado de la luz solar
	Identificador único de dispositivo		For in vitro diagnostic use only		

ASISTENCIA

Si tiene cualquier pregunta sobre el uso de este producto, llame al servicio de asistencia técnica al 1-866-982-3818 (de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 h, hora central de Estados Unidos).

Distributed by:
HENRY SCHEIN, INC.
135 DURYEA ROAD
Melville, NY 11747 USA
Made in China
REV.2025/04



TEST URINAIRE RAPIDE DE DÉPISTAGE DE DROGUES ONESTEP+

570-3927

570-3928

FR

Réservé à un usage médical et professionnel de diagnostics in vitro.**Mode d'emploi**

Mode d'emploi d'un dispositif de gobelet consistant en une combinaison de tests pour le dépistage des drogues suivantes : 6-monoacétylmorphine, d-amphétamine, benzoylécgonine, buprénorphine, EDDP, norfentanyl, d,l-méthadone, d-méthamphétamine, d,l-méthylènedioxy-méthylamphétamine, morphine, nortriptyline, oxazépam, oxycodone, phencyclidine, dextropropoxyphène, sécobarbital, THC-COOH et tramadol dans l'urine humaine.

USAGE PRÉVU

Le test urinaire rapide de dépistage de drogues Henry Schein ONESTEP+ est un test immunologique rapide à flux latéral permettant l'adéquation qualitative de 6-monoacétylmorphine, de d-amphétamine, benzoylécgonine, buprénorphine, EDDP, norfentanyl, méthadone, d-méthamphétamine, d,l-méthylènedioxy-méthylamphétamine, morphine, nortriptyline, oxazépam, oxycodone, phencyclidine, dextropropoxyphène, sécobarbital, THC-COOH et tramadol dans l'urine humaine. Les concentrations seuils des tests et les composés sur lesquels ils sont étalonnés sont les suivants :

Test	Agent d'étalonnage	Seuil (ng/ml)
6-MAM	6-monoacétylmorphine	10
AMP	d-amphétamine	500/1000
BAR	Sécobarbital	300
BUP	Buprénorphine	10
BZO	Oxazépam	300
COC	Benzoylécgonine	150/300
EDDP	2-éthylidène-1,5-diméthyl-3,3-diphénylpyrrolidine	300
FEN ou FYL	Norfentanyl	5
MDMA	Méthylènedioxy-méthylamphétamine	500
MET	d-méthamphétamine	500/1000
MTD	Méthadone	300
OPI	Morphine	300/2000
OXY	Oxycodone	100
PCP	Phencyclidine	25
PPX	Dextropropoxyphène	300
TCA	Nortriptyline	1000
THC	11-nor-Δ9-THC-COOH	50
TRA ou TML	Tramadol	100

Les gobelets pour test unique ou test multiple peuvent contenir jusqu'à dix-huit (18) des analytes énumérés ci-dessus, dans n'importe quelle combinaison, avec ou sans tests d'adulthood/de validité de l'échantillon (SVT). Les tests ne fournissent qu'un résultat préliminaire. Une méthode chimique alternative plus spécifique doit être utilisée pour obtenir un résultat positif confirmé. La chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC-MS), la chromatographie en phase liquide / spectrométrie de masse (LC/MS) et leurs versions avec spectromètre de masse en tandem sont les méthodes de confirmation préférées. Tout résultat d'un test de dépistage d'abus de drogues doit être examiné avec soin et discernement, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer des résultats préliminaires positifs.

PRINCIPE

Le test urinaire rapide de dépistage de drogues Henry Schein ONESTEP+ est un test immunologique basé sur le principe de la liaison compétitive. Les drogues susceptibles d'être présentes dans l'échantillon d'urine sont en concurrence avec leur conjugué respectif pour les sites de liaison sur leur anticorps spécifique. Pendant le test, l'échantillon d'urine remonte par capillarité. Une drogue, si elle est présente dans l'échantillon d'urine en-dessous de la concentration seuil respective, ne saturera pas les sites de liaison de son anticorps spécifique enrobé sur les particules. Les particules enrobées d'anticorps sont alors capturées par le conjugué de drogue immobilisé et une ligne colorée visible apparaît dans la zone de la ligne de test de la bandelette spécifique. La ligne colorée ne se

formera pas dans la zone de la ligne de test si le niveau de drogue est supérieur à la concentration seuil respective, car la drogue saturera tous les sites de liaison de l'anticorps spécifique enrobé sur les particules. Un échantillon d'urine positif à la drogue ne produira pas de ligne colorée dans la zone de la ligne de test spécifique de la bandelette en raison de la concurrence de la drogue, tandis qu'un échantillon d'urine négatif à la drogue ou un échantillon contenant une concentration de drogue inférieure au seuil produira une ligne dans la zone de la ligne de test. Pour servir de contrôle de procédure, une ligne colorée apparaîtra toujours dans la zone de la ligne de contrôle, indiquant que le volume approprié d'échantillon a été ajouté et que la membrane a été imbibée.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Réservé au diagnostic in vitro.
- Traiter tous les échantillons d'urine et le matériel comme s'ils étaient susceptibles de transmettre une infection. Porter des gants et une tenue de laboratoire appropriée pour éviter tout contact cutané avec les échantillons d'urine. Des méthodes de manipulation et d'élimination appropriées doivent être mises en place.
- Ne pas utiliser le kit de test après la date de péremption.
- Le dispositif doit rester dans le sachet scellé jusqu'à son utilisation.
- Le test est à usage unique. Ne pas réutiliser le test.
- Ne pas toucher la zone de test du gobelet.

STOCKAGE ET STABILITÉ

- Le test urinaire rapide de dépistage de drogues Henry Schein ONESTEP+ doit être conservé à une température comprise entre 2 et 30 °C dans son sachet d'origine scellé. Le dispositif est stable jusqu'à la date de péremption imprimée sur le sachet scellé. Ne pas utiliser le dispositif après la date de péremption imprimée sur le sachet.
- Le dispositif doit rester dans le sachet scellé jusqu'à ce qu'il soit utilisé, mais il reste stable jusqu'à une heure après l'ouverture.
- **Ne pas congeler.** (Température inférieure à 0 °C).

MATÉRIEL

Matériel fourni :

- Dispositifs de test (emballés individuellement dans un sachet en aluminium) • Mode d'emploi
- Carte couleur de validité/adulthood de l'échantillon (le cas échéant) • Gants jetables
- Schéma illustrant la procédure d'utilisation • Étiquettes de scellés de sécurité

Matériel nécessaire, mais non fourni :

- Minuteur, horloge ou montre

PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS


- L'urine fraîche ne nécessite pas de traitement préalable particulier et l'échantillon peut être recueilli à tout moment de la journée.
- Si l'échantillon n'est pas testé dans les 24 heures suivant le prélèvement, il peut être conservé au réfrigérateur [2-8 °C] jusqu'à 7 jours ou congelé à -20 °C jusqu'à 1 an.
- Si l'échantillon est réfrigéré ou congelé, laisser le dispositif de test, les contrôles et/ou les échantillons revenir à la température ambiante [15-30 °C] avant de procéder au test.

MODE D'EMPLOI

Ne pas ouvrir le sachet du dispositif de test avant que le test ne soit prêt à être effectué. Le dispositif doit être utilisé dans l'heure qui suit l'ouverture du sachet.

1. Sortir le dispositif de test du sachet scellé. Si votre procédure l'exige, inscrivez le nom ou l'identifiant du donneur sur l'étiquette dans l'espace prévu à cet effet (fig. 1)
2. Ouvrir le couvercle du gobelet de test. Uriner directement dans le gobelet de test. S'assurer de remplir le gobelet de test avec l'échantillon d'urine entre un niveau minimum et un niveau maximum (marqués sur le gobelet). (Fig. 2)
3. Une fois l'échantillon d'urine collecté, bien fermer le couvercle et retourner le gobelet à un responsable de la collecte. (Fig. 3)
4. Le responsable de la collecte doit décoller l'étiquette pour faire apparaître le(s) résultat(s) du test. (Fig. 4)
5. Interpréter les résultats des tests. (Fig. 5) Lire les résultats au bout de 5 minutes. **Ne pas interpréter le résultat avant 5 minutes ou après 30 minutes.** Se reporter à l'illustration 5 du schéma de test pour connaître les résultats possibles du test.

Remarque : Les résultats négatifs peuvent être interprétés dès que les lignes de contrôle apparaissent et que les lignes de test sont visibles, ce qui se produit généralement dans la minute qui suit. Les résultats positifs des tests de dépistage de drogues doivent être lus au bout de 5 minutes. Tous les résultats restent stables pendant 30 minutes.

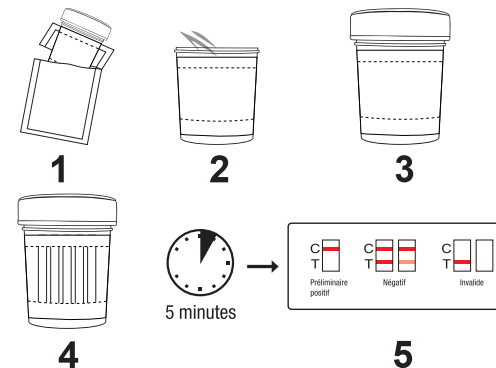**INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS**

(Veuillez vous référer à l'illustration ci-dessous)

NÉGATIF : Deux lignes apparaissent. Une ligne rouge doit se trouver dans la zone de contrôle (C) et une autre ligne rouge ou rose doit se trouver dans la zone de test (Drug/T). Ce résultat négatif indique qu'il n'y a pas de drogue dans l'échantillon, ou que la drogue est présente, mais en dessous de la concentration seuil du test.


***REMARQUE :** La nuance de rouge dans la zone de la ligne de test (Drug/T) peut varier, mais elle doit être considérée comme négative chaque fois qu'il y a une ligne rose, même légère.

PRÉLIMINAIRE POSITIF : Une ligne rouge apparaît dans la zone de contrôle (C). Aucune ligne n'apparaît dans la zone de test (Drug/T). Ce résultat préliminaire positif indique que l'échantillon peut contenir la drogue à une concentration supérieure au seuil du test.

IMPORTANT : Ce n'est pas pour rien qu'un résultat positif à un dépistage de drogues est qualifié de préliminaire. Une méthode chimique alternative plus spécifique doit être utilisée pour obtenir un résultat positif confirmé.

NON VALIDE : La ligne de contrôle n'apparaît pas. Un volume d'échantillon insuffisant ou des techniques de procédure incorrectes sont les raisons les plus probables expliquant l'échec de la ligne de contrôle. Revoir la procédure d'essai et répéter le test en utilisant un nouveau dispositif de test. Si le problème persiste, cessez immédiatement d'utiliser le lot et contactez le service technique au 1-866-982-3818.

Remarque : L'intensité de la couleur des lignes ou la largeur des lignes de test n'ont aucune signification. Un résultat préliminaire positif n'indique pas toujours que le donneur a consommé des drogues illégales, et un résultat négatif n'indique pas toujours que le donneur n'a pas pris de drogues illégales. Plusieurs facteurs influencent la fiabilité des tests de dépistage de drogues.

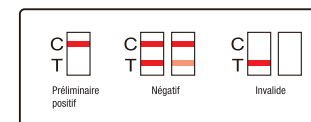**INTERPRÉTATION D'ADULTÉRANTS**

Les résultats semi-quantitatifs sont obtenus en comparant visuellement les blocs de couleur réagissant sur la bande avec les blocs de couleur imprimés sur le nuancier.

Veuillez vous référer à la carte couleur fournie dans ce kit pour l'interprétation du résultat d'adultération. Lire les tampons de test d'adultération après 2 minutes.

PAS D'ADULTÉRATION	ADULTÉRATION
OXI	
SG	
pH	
NIT	
GLUT	
CREA	

CONTRÔLE QUALITÉ

Un contrôle de procédure est intégré sur chaque bandelette de test. Une ligne rouge qui apparaît dans la zone de contrôle

(C) est un contrôle de procédure interne. Elle confirme que le volume de l'échantillon est suffisant, que la membrane est bien imbibée et que la technique d'intervention est correcte.

Les normes de contrôle externes ne sont pas fournies avec ce kit. Toutefois, il est recommandé de tester des témoins positifs et négatifs dans le cadre des bonnes pratiques de laboratoire afin de confirmer la procédure de test et de vérifier la bonne exécution du test. Des tests de contrôle qualité doivent être effectués pour chaque nouveau lot et chaque nouvel opérateur. Respecter les lois et réglementations locales, nationales et fédérales. Veuillez contacter notre service d'assistance technique au 1-866-982-3818 pour obtenir des informations sur les contrôles qui fonctionnent avec le dispositif.

LIMITES

- 1. Le test urinaire rapide de dépistage de drogues Henry Schein ONESTEP+ ne fournit qu'un résultat analytique qualitatif et préliminaire. Une méthode chimique alternative plus spécifique doit être utilisée pour obtenir un résultat préliminaire positif confirmé. La chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC-MS), la chromatographie en phase liquide / spectrométrie de masse (LC/MS) et leurs versions avec spectromètre de masse en tandem sont les méthodes de confirmation préférées.
- 2. Il est possible que des erreurs techniques ou de procédure, ainsi que d'autres substances interférentes dans l'échantillon d'urine, entraînent des résultats faux.
- 3. Les substances introduites intentionnellement dans l'échantillon, telles que l'eau de Javel ou le peroxyde, peuvent produire des résultats faux, quelle que soit la méthode d'analyse utilisée.
- 4. Un résultat positif n'indique pas le niveau d'intoxication, la voie d'administration ou la concentration de la drogue dans l'échantillon d'urine.
- 5. Un résultat négatif n'indique pas nécessairement que l'urine est exempte de drogue. Des résultats négatifs sont possibles si la concentration de la drogue est inférieure au seuil.
- 6. Le test ne permet pas de distinguer les drogues illicites et certains médicaments.
- 7. Certains aliments ou compléments alimentaires peuvent donner un résultat positif.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Précision

Le test urinaire rapide de dépistage de drogues Henry Schein ONESTEP+ a été évaluée avec 3 opérateurs et 80 échantillons d'urine clinique par opérateur. Les échantillons ont été analysés par LC-MS et par le test urinaire rapide de dépistage de drogues Henry Schein ONESTEP+. Les échantillons ont été divisés en cinq catégories en fonction de leur concentration : sans drogue, moins de la moitié du seuil, proche du seuil négatif, proche du seuil positif et fortement positif. Les résultats sont les suivants :

6-MAM

Résultats		6-MAM10		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 10 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 10 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur B	Supérieur à 10 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 10 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur C	Supérieur à 10 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 10 ng/ml (-)	2	38	95.00%
	Précision	96.25%		

Amphétamine (AMP500)

Résultats		AMP500		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 500 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 500 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur B	Supérieur à 500 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 500 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Opérateur C	Supérieur à 500 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 500 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Amphétamine (AMP)

Résultats		AMP1000		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 1000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 1000 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		
Opérateur B	Supérieur à 1000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 1000 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur C	Supérieur à 1000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 1000 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		

Sécobarbital (BAR)

Résultats		BAR300		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur B	Supérieur à 300 ng/ml (+)	40	0	100.00%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	98.75%		
Opérateur C	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Buprénorphine (BUP)

Résultats		BUP10		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 10 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 10 ng/ml (-)	2	38	95.00%
	Précision	95.00%		
Opérateur B	Supérieur à 10 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 10 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur C	Supérieur à 10 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 10 ng/ml (-)	2	38	95.00%
	Précision	95.00%		

Oxazépam (BZO)

Résultats		BZO300		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	

Opérateur A	Supérieur à 300 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur B	Supérieur à 300 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur C	Supérieur à 300 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		

Cocaïne (COC150)

Résultats		COC150		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 150 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 150 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur B	Supérieur à 150 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 150 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur C	Supérieur à 150 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 150 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Cocaïne (COC)

Résultats		COC300		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur B	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	2	38	95.00%
	Précision	96.25%		
Opérateur C	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

EDDP

Résultats		EDDP300		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur B	Supérieur à 300 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		

Opérateur C	Supérieur à 300 ng/ml (+)	40	0	100.00%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	100.00%		

Norfentanyl (FEN or FYL)

Résultats		FYL5		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 5 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 5 ng/ml (-)	2	38	95.00%
	Précision	96.25%		
Opérateur B	Supérieur à 5 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 5 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur C	Supérieur à 5 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 5 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Méthamphétamine (MET500)

Résultats		MET500		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 500 ng/ml (+)	40	0	100.00%
	Inférieur à 500 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	98.75%		
Opérateur B	Supérieur à 500 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 500 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur C	Supérieur à 500 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 500 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Méthamphétamine (MET)

Résultats		MET100		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 1000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 1000 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		
Opérateur B	Supérieur à 1000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 1000 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur C	Supérieur à 1000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 1000 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		

Méthadone (MTD)

Résultats		MTD300		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	

Opérateur A	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur B	Supérieur à 300 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	97.50%		
Opérateur C	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		

Opiacés (OPI)

Résultats		OPI300		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur B	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		
Opérateur C	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Opiacés (OPI2000)

Résultats		OPI2000		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 2000 ng/ml (+)	40	0	100.00%
	Inférieur à 2000 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	100.00%		
Opérateur B	Supérieur à 2000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 2000 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur C	Supérieur à 2000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 2000 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		

Oxycodone (OXY)

Resultados		OXY100		% de concordance avec LC-MS
Muestra de orina		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 100 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 100 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur B	Supérieur à 100 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 100 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Opérateur C	Supérieur à 100 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 100 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		

Phencyclidine (PCP)

Résultats		PCP25		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 25 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 25 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur B	Supérieur à 25 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 25 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur C	Supérieur à 25 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 25 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Propoxyphène (PPX)

Résultats		PPX300		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		
Opérateur B	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur C	Supérieur à 300 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 300 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		

Nortriptyline (TCA)

Résultats		TCA1000		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 1000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 1000 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur B	Supérieur à 1000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 1000 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur C	Supérieur à 1000 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 1000 ng/ml (-)	0	40	100.00%
	Précision	98.75%		

Marijuana (THC)

Résultats		THC50		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	

Opérateur A	Supérieur à 50 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 50 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur B	Supérieur à 50 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 50 ng/ml (-)	2	38	95.00%
	Précision	95.00%		
Opérateur C	Supérieur à 50 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 50 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		

Tramadol (TRA or TML)

Résultats		TML100		% de concordance avec LC-MS
Échantillon d'urine		+	-	
Opérateur A	Supérieur à 100 ng/ml (+)	38	2	95.00%
	Inférieur à 100 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	96.25%		
Opérateur B	Supérieur à 100 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 100 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		
Opérateur C	Supérieur à 100 ng/ml (+)	39	1	97.50%
	Inférieur à 100 ng/ml (-)	1	39	97.50%
	Précision	97.50%		

Spécificité analytique/réactivité croisée

La spécificité de chaque test a été déterminée en testant des solutions inventées obtenues en ajoutant des étalons certifiés de composés chimiquement apparentés ou structurellement similaires dans de l'urine exempte de drogue. La réactivité croisée relative (le cas échéant) représente la concentration minimale nécessaire pour obtenir un résultat similaire au niveau de seuil du test.

Drogue	Concentration (ng/ml)	% Réactivité croisée
6-MAM		
6-monoacétylmorphine (6-MAM)	10	100 %
6-acétylmorphine	10	100 %
Héroïne	60	16,7 %
Morphine	75 000	0,01 %
s-monoacétylmorphine	10	100 %
Normorphine	>100 000	--
Nalorphine HCl	>100 000	--
Hydrocodone	>100 000	--
Hydromorphone	>100 000	--
Chlordiazépoxyde	>100 000	--
Clobazam	>100 000	--
D-amphétamine	>100 000	--
(±)-Amphétamine	>100 000	--
Lévorphanol Tartrate	>100 000	--
Codéine	>100 000	--

Éthylmorphine	>100 000	--
Morphine3-β-D-glucuronide	>100 000	--
Norcodéine	>100 000	--
Oxycodone	>100 000	--
Oxymorphone	>100 000	--
Chlorhydrate de procaine	>100 000	--
Thébaïne	>100 000	--
6-acétylcodéine	>100 000	--
Buprénorphine	>100 000	--
Dihydrocodéine	>100 000	--
Dextrométhorphone	>100 000	--
Chlorhydrate d'imipramine	>100 000	--
Mépididine	>100 000	--
(±)-Méthadone	>100 000	--
Mitragynine (kratom)	>100 000	--
Morphine-6-β-D-glucuronide	>100 000	--
Chlorhydrate de naloxone	>100 000	--
Chlorhydrate de naltrexone	>100 000	--
Naproxène	>100 000	--
Norbuprénorphine	>100 000	--
Norbuprénorphine-3-D-Glucuronide	>100 000	--
Noroxycodone HCL	>100 000	--
Noroxymorphone HCL	>100 000	--
Maléate de (+)-norpropoxyphène	>100 000	--
Oxymorphone-3β-D-glucuronide	>100 000	--
Tapentadol HCl	>100 000	--
Chlorhydrate de tramadol	>100 000	--
Amphétamine (AMP500)		
D-amphétamine	500	100 %
Hydroxyamphétamine	4000	12,5 %
(+/-)-méthylènedioxyamphétamine (MDA)	200	250 %
D,L-amphétamine	500	100 %
Diéthylstilbestrol	2500	20 %
L-amphétamine	25 000	2 %
Phentermine	4000	12,5 %
β-Phényléthylamine	50 000	1 %
Tyramine	50 000	1 %
p-hydroxynoréphédrine	50 000	1 %
p-Hydroxyamphétamine	50 000	1 %
D,L-noréphédrine	50 000	1 %
(+/-)3,4-méthylènedioxy-n-		

éthylamphétamine (MDEA)	100 000	0,5 %
d-méthamphétamine	>100 000	--
l-Méthamphétamine	>100 000	--
(+/-)3,4-méthylènedioxyméthamphétamine		
(MDMA)	>100 000	--
Chlorhydrate d'éphédrine	>100 000	--
Phénylpropanolamine	>100 000	--
Benzphétamine *	>100 000	--
L-éphédrine	>100 000	--
L-épinéphrine	>100 000	--
D,L-épinéphrine	>100 000	--
Amphétamine (AMP)		
D-amphétamine	1000	100 %
Hydroxyamphétamine	8000	12,5 %
(+/-)-méthylènedioxyamphétamine (MDA)	400	250 %
D,L-amphétamine	1000	100 %
Diéthylstilbestrol	5000	20 %
L-amphétamine	50 000	2 %
Phentermine	8000	12,5 %
β-Phényléthylamine	100 000	1 %
Tyramine	100 000	1 %
p-hydroxynoréphédrine	100 000	1 %
D,L-noréphédrine	100 000	1 %
p-Hydroxyamphétamine	100 000	1 %
d-méthamphétamine	>100 000	--
L-méthamphétamine	>100 000	--
Chlorhydrate d'éphédrine	>100 000	--
(+/-)3,4-méthylènedioxyméthamphétamine		
(MDMA)	>100 000	--
Phénylpropanolamine	>100 000	--
Benzphétamine *	>100 000	--
L-éphédrine	>100 000	--
L-épinéphrine	>100 000	--
D,L-épinéphrine	>100 000	--
(+/-)3,4-Méthylènedioxyéthylamphétamine (MDEA)	>100 000	--
Sécobarbital (BAR)		
Sécobarbital	300	100 %
Alphénal	150	200 %
Amobarbital	300	100 %

Aprobarbital	250	120 %
Butabarbital	2500	12 %
Butéthyl	100	300 %
Cyclopentobarbital	600	50 %
Pentobarbital	250	120 %
Phénobarbital	250	120 %
Butalbital	2500	12 %
Buprénorphine (BUP)		
Buprénorphine	10	100 %
Buprénorphine 3-D-Glucuronide	160	6,25 %
Norbuprénorphine	10	100 %
Norbuprénorphine-3-D-Glucuronide	200	5 %
Morphine	>100 000	--
Oxymorphone	>100 000	--
Hydromorphone	>100 000	--
Oxazépam (BZO)		
Oxazépam	300	100 %
a-hydroxyalprazolam	1260	23,8 %
Alprazolam	200	150 %
Bromazépam	1560	19,2 %
Chlordiazépoxide	1560	19,2 %
Clobazam	100	300 %
Clonazépam	2500	12 %
Clorazépate dipotassique	200	150 %
Desalkylflurazépam	400	75 %
Diazépam	200	150 %
Estazolam	2500	12 %
Flunitrazépam	400	75 %
D,L-lorazépam	1560	19,2 %
Midazolam	12 500	2,4 %
Nitrazépam	100	300 %
Norchlordiazépoxide	200	150 %
Nordiazépam	400	75 %
Oxazépam glucuronide	500	60 %
R,S-lorazépam glucuronide	160	187,5 %
Témazépam	100	300 %
Triazolam	2500	12 %
Démoxépam	2000	15 %
Flurazépam	500	60 %
Délorazépam	>100 000	--

Cocaïne (COC150)		
Benzoylécgonine	150	100 %
Cocaéthylène	150	100 %
Chlorhydrate de cocaïne	150	100 %
Ecgonine	25 000	0,6 %
Norcocaïne	50 000	0,3 %
Ester méthylique d'ecgonine	>100 000	--
Cocaïne (COC)		
Benzoylécgonine	300	100 %
Cocaéthylène	300	100 %
Chlorhydrate de cocaïne	300	100 %
Ecgonine	50 000	0,6 %
Norcocaïne	100 000	0,3 %
Ester méthylique d'ecgonine	>100 000	--
EDDP		
Perchlorate d'EDDP	300	100 %
Méthadone	>100 000	--
EMDP	>100 000	--
Doxylamine	>100 000	--
Disopyramide	>100 000	--
LAAM (Lévo-alpha-acétylméthadol) HCl	>100 000	--
Alpha Méthadol	>100 000	--
Norfentanyl (FEN ou FYL)		
Norfentanyl	5	100 %
Fentanyl	10	50 %
Acétyl fentanyl	150	3,3 %
Acétyl Norfentanyl	200	2,5 %
(±)-β-Hydroxythiofentanyl HCl	2500	0,2 %
Acryl Fentanyl	2500	0,2 %
Butyryl Fentanyl	5000	0,1%
Cis-d, l 3-Méthylfentanyl	50 000	0,01 %
Furanyl Fentanyl	10 000	0,05%
Para-fluoro butyryl Fentanyl (P-FBF)	80 000	0,01 %
Para-fluoro Fentanyl	40 000	0,005 %
9-HydroxyRisperidone	10 000	0,05 %
Alfentanil	20 000	0,03 %
Isobutyryl Fentanyl	5000	0,1 %
Norcarfentail Oxalate	50 000	0,01 %

Remifentanyl	15 000	0,03 %
Valeryl Fentanyl	20 000	0,03 %
Thienyl Fentanyl	50	10 %
Trans-d, l 3-méthylfentanyl	50	10 %
4-fluoro-isobutyryl fentanyl	>20 000	--
Despropionyl fentanyl (4-ANPP)	>20 000	--
MT-45	>100 000	--
Ocfentanyl	>100 000	--
Rispéridone	>100 000	--
Sufentanyl	>100 000	--
Oxalate de carfentanyl	>10 000	--
Chlorhydrate de labétalol	>100 000	--
Trazodone	>100 000	--
U-47700	>100 000	--
ω-1-Hydroxyfentanyl	>20 000	--
Pour les composés opioïdes		
6-acétylmorphine	>100 000	--
Amphétamine	>100 000	--
Buprénorphine	>100 000	--
Buprénorphine 3-D-Glucuronide	>100 000	--
Codéine	>100 000	--
Dextrométhorphan	>100 000	--
Dihydrocodéine	>100 000	--
EDDP	>100 000	--
EMDP	>100 000	--
Fluoxétine	>100 000	--
Héroïne	>100 000	--
Hydrocodone	>100 000	--
Hydromorphone	>100 000	--
Kétamine	>100 000	--
Lévorphanol Tartrate	>100 000	--
Mépidine	>100 000	--
Méthadone	>100 000	--
Morphine	>100 000	--
Morphine-3-β-D-glucuronide	>100 000	--
Chlorhydrate de naloxone		
chlorhydrate chlorhydrate chlorhydrate chlorhydrate	>100 000	--
Chlorhydrate de naltrexone	>100 000	--
Norbuprénorphine	>100 000	--
Norcodéine	>100 000	--
Norkétamine	>100 000	--

Normépéridine	>100 000	--
Normorphine	>100 000	--
Noroxycodone	>100 000	--
Oxycodone	>100 000	--
Oxymorphone	>100 000	--
Pentazocine (Talwin)	>100 000	--
Pipampérone	>100 000	--
Chlorhydrate de tapentadol	>100 000	--
Thioridazine	>100 000	--
Tilidine	>100 000	--
Tramadol	>100 000	--
o-desméthyl tramadol	>100 000	--
n-desméthyl tramadol	>100 000	--
Méthylénedioxy-méthylamphétamine (MDMA)		
(±)-MDMA	500	100 %
(+/-)3,4-méthylénedioxy-n-éthylamphétamine (MDEA)	300	166,7 %
(+/-)-méthylénedioxyamphétamine (MDA)	3000	16,7 %
L-méthamphétamine	50 000	1 %
7-aminoclonazépam	100 000	0,5 %
d-méthamphétamine	>100 000	--
d-amphétamine	>100 000	--
l-amphétamine	>100 000	--
Méthamphétamine (MET500)		
d-méthamphétamine	500	100 %
(+/-)3,4-méthylénedioxy-n-éthylamphétamine		
(MDEA)	10 000	5 %
(±)-MDMA	1250	40 %
L-méthamphétamine	12 500	4 %
Fenfluramine	25 000	2 %
p-hydroxyméthamphétamine	5000	10 %
D,L-méthamphétamine	500	100 %
β-Phényléthylamine	25 000	2 %
Méphéterminine	25 000	2 %
Chlorhydrate de méthoxyphénamine	25 000	2 %
L-amphétamine	40 000	1,25 %
Chlorhydrate d'éphédrine	100 000	0,5 %
(1R,2S)-(-)-éphédrine	100 000	0,5 %
D-amphétamine	>100 000	--

Chloroquine	>100 000	--
(+/-)3,4- méthylénedioxyamphétamine (MDA)	>100 000	--
L-phényléphrine	>100 000	--
Triméthobenzamide	>100 000	--
Chlorhydrate de procaine	>100 000	--
d/l-Amphétamine	>100 000	--
Méthamphétamine (MET)		
d-méthamphétamine	1000	100 %
(+/-)3,4-méthylénedioxy-n-éthylamphétamine		
(MDEA)	20 000	5 %
(+/-)3,4-méthylénedioxyamphétamine		
(MDMA)	2500	40 %
L-méthamphétamine	25 000	4 %
Fenfluramine	50 000	2 %
p-hydroxyméthamphétamine	10 000	10 %
D,L-méthamphétamine	1000	100 %
β-Phényléthylamine	50 000	2 %
Méphéterminine	50 000	2 %
Chlorhydrate de méthoxyphénamine	50 000	2 %
L-amphétamine	75 000	1.33%
D-amphétamine	>100 000	--
D,L-amphétamine	>100 000	--
Chloroquine	>100 000	--
Éphédrine HCl	>100 000	--
(+/-)3,4- méthylénedioxyamphétamine (MDA)	>100 000	--
Triméthobenzamide	>100 000	--
l-phényléphrine	>100 000	--
(1R,2S)-(-)-éphédrine	>100 000	--
Chlorhydrate de procaine	>100 000	--
Méthadone (MTD)		
(±)-Méthadone	300	100 %
EDDP	>100 000	--
EMDP	>100 000	--
LAAM	>100 000	--
Alpha Méthadol	>100 000	--
Doxylamine	>100 000	--
Opiacés (OPI)		

Morphine	300	100 %
6-acétylmorphine	400	75 %
Codéine	300	100 %
Dihydrocodéine	1000	30 %
Éthylmorphine	100	300 %
Héroïne	600	50 %
Hydrocodone	500	60 %
Hydromorphone	1000	30 %
Lévorphanol Tartrate	10 000	3 %
Nalorphine HCl	50 000	0,6 %
Thébaïne	6240	4.8%
s-monoacétylmorphine	300	100 %
Morphine-3-β-d-glucuronide	1000	30 %
6-monoacétylmorphine (6-MAM)	150	200 %
Codéine-6-β-D-glucuronide	150	200 %
Morphine-6-β-D-glucuronide	150	200 %
6-acétylcodéine	900	33,3 %
Normorphine	>100 000	--
Oxycodone	>100 000	--
Oxymorphone	>100 000	--
Norcodéine	>100 000	--
Procaine	>100 000	--
Norpropoxyphène	>100 000	--
Opiacés (OPI2000)		
Morphine	2000	100 %
6-acétylmorphine	2500	80 %
Codéine	1000	200 %
Dihydrocodéine	1500	133,3 %
Éthylmorphine	2500	80 %
Codéine-6-β-D-glucuronide	2500	80 %
Héroïne	5000	40 %
Hydrocodone	5000	40 %
Hydromorphone	2500	80 %
Lévorphanol Tartrate	10 000	20 %
Chlorhydrate de nalorphine	5000	40 %
Norcodéine	4000	50 %
Normorphine	5000	40 %
Oxymorphone	75 000	2,7 %
s-monoacétylmorphine	2000	100 %
Morphine-6-β-D-glucuronide	2000	100 %
Thébaïne	13 000	15,4 %

Morphine 3-β-D-Glucuronide	2000	100 %
6-monoacétylmorphine (6-MAM)	1500	133 %
6-acétylcodéine	10 000	20 %
Oxycodone	>100 000	--
Procaine	>100 000	--
Norpropoxyphène	>100 000	--
Oxycodone (OXY)		
Oxycodone	100	100 %
Éthyl Oxycodone	75 000	0,13 %
Hydrocodone	5000	2 %
Hydromorphone	25 000	0,4 %
Lévorphanol Tartrate	25 000	0,4 %
Chlorhydrate de naloxone	10 000	1 %
Chlorhydrate de naltrexone	50 000	0,2 %
Oxymorphone	200	50 %
Oxymorphone-3β-D-glucuronide	500	20 %
Noroxycodone	1500	6,7 %
Noroxymorphone	3000	3,3 %
Dihydrocodéine	>100 000	--
Codéine	>100 000	--
Morphine	>100 000	--
Thébaïne	>100 000	--
Buprénorphine	>100 000	--
Éthylmorphine	>100 000	--
6-acétylmorphine	>100 000	--
Phencyclidine (PCP)		
PCP (Phencyclidine)	25	100 %
4-Hydroxyphencyclidine	12 500	0,2 %
Propoxyphène (PPX)		
Propoxyphène	300	100 %
Norpropoxyphène	300	100 %
Nortriptyline (TCA)		
Nortriptyline	1000	100 %
Amitriptyline	1500	66,7 %
Chlorphéniramine	50 000	2 %
Clomipramine	10 000	10 %
Chlorhydrate de cyclobenzaprine	5000	20 %
Désipramine	1000	100 %

Doxépine	2000	50 %
Duloxétine	10 000	10 %
Imipramine	1000	100 %
Norclomipramine	12 500	8 %
Nordoxépine	1000	100 %
Promazine	50 000	2 %
Trimipramine	10 000	10 %
Maprotiline	>100 000	--
Chlorhydrate de prométhazine	>100 000	--
Marijuana (THC)		
(±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC	50	100 %
11-nor-Δ8-THC -9-COOH	30	166,7 %
(-)-11-nor-9-carboxy-Δ9-THC	50	100 %
11-nor-Δ9-THC -carboxy glucuronide	100	50 %
11-hydroxy-Δ9-Tétrahydrocannabinol	5000	1 %
Δ8- tétrahydrocannabinol	1300	3,8 %
Δ9- tétrahydrocannabinol	5000	1 %
Cannabinol	20 000	0,25 %
Cannabidiol	>100 000	--
(±)-11-Hydroxy-Δ9-THC	>100 000	--
Tramadol (TRA ou TML)		
Tramadol	100	100 %
n-desméthyl tramadol	400	25 %
o-desméthyl tramadol	1000	10 %
o-desméthyl Venlafaxine	>10 000	--
Venlafaxine	>100 000	--

*La benzphétamine se métabolise en méthamphétamine et en amphétamine dans le corps, de sorte qu'un donneur prenant de la benzphétamine peut produire des résultats positifs pour l'AMP.

Précision/reproductibilité

La précision, la reproductibilité et la sensibilité des vingt-deux (22) tests de dépistage de drogues disponibles sur Le test urinaire rapide de dépistage de drogues Henry Schein ONESTEP+ ont été déterminées sur une période de 25 jours par 3 opérateurs qui ont effectué 2 passages par jour sur 3 lots de dispositifs finis. Les aliquotes ont été masquées pour éviter que les opérateurs ne sachent quelle aliquote contenait quelle solution de test. Les solutions testées devaient être sans drogue, -75 % du seuil de test, -50 % du seuil de test, -25 % du seuil de test, le seuil lui-même, +25 % du seuil, +50 % du seuil, +75 % du seuil et 200 % du seuil. Les données obtenues lors des tests indiquent une corrélation de >99 % à +/-50 %, +/-75 %, 200% et sans drogue pour chaque essai.

Drogues/médicaments	Concen- tration (ng/ml)	n	Lot1			Lot2			Lot3		
				+	-	+	-	+	-	+	-

6-monoacétylmorphine	0	50	50	0	50	0	50	0
	2,5	50	50	0	50	0	50	0
	5	50	50	0	50	0	50	0
	7,5	50	49	1	48	2	48	2
	10	50	26	24	24	26	24	26
	12,5	50	2	48	2	48	1	49
	15	50	0	50	0	50	0	50
	17,5	50	0	50	0	50	0	50
	20	50	0	50	0	50	0	50
Amphétamine 500	0	50	50	0	50	0	50	0
	125	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	375	50	49	1	50	0	49	1
	500	50	23	27	24	26	25	25
	625	50	0	50	1	49	1	49
	750	50	0	50	0	50	0	50
	875	50	0	50	0	50	0	50
	1000	50	0	50	0	50	0	50
Amphétamine	0	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	750	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	23	27	25	25	26	24
	1250	50	0	50	0	50	0	50
	1500	50	0	50	0	50	0	50
	1750	50	0	50	0	50	0	50
	2000	50	0	50	0	50	0	50
Sécobarbital	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	25	25	25	25	25	25
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Drogues/médicaments	Concen- tration (ng/ml)	n	Lot1		Lot2		Lot3	
				+	-	+	-	+

Buprénorphine	0	50	50	0	50	0	50	0
	2.5	50	50	0	50	0	50	0
	5	50	50	0	50	0	50	0
	7.5	50	48	2	48	2	49	1
	10	50	26	24	27	23	24	26
	12.5	50	2	48	2	48	2	48
	15	50	0	50	0	50	0	50
	17.5	50	0	50	0	50	0	50
	20	50	0	50	0	50	0	50
Oxazéпам	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	50	0	49	1	49	1
	300	50	26	24	22	28	24	26
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Benzoylecgonine	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	25	25	25	25	24	26
	375	50	1	49	0	50	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Benzoylecgonine 150	0	50	50	0	50	0	50	0
	37.5	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	112.5	50	49	1	48	2	48	2
	150	50	25	25	22	28	23	27
	187.5	50	2	48	1	49	2	48
	225	50	0	50	0	50	0	50
	262.5	50	0	50	0	50	0	50
	300	50	0	50	0	50	0	50
EDDP	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	50	0
	300	50	24	26	24	26	23	27
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50

Norfantanyl	0	50	50	0	50	0	50	0
	1.25	50	50	0	50	0	50	0
	2.5	50	50	0	50	0	50	0
	3.75	50	48	2	48	2	48	2
	5	50	24	26	25	25	24	26
	6.25	50	2	48	1	49	2	48
	7.5	50	0	50	0	50	0	50
	8.75	50	0	50	0	50	0	50
	10	50	0	50	0	50	0	50
Méthylènedioxy-méthylamphé- tamine	0	50	50	0	50	0	50	0
	125	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	375	50	50	0	50	0	49	1
	500	50	22	28	25	25	23	27
	625	50	1	49	0	50	1	49
	750	50	0	50	0	50	0	50
	875	50	0	50	0	50	0	50
	1000	50	0	50	0	50	0	50
Méthamphétamine 500	0	50	50	0	50	0	50	0
	125	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	375	50	49	1	49	1	48	2
	500	50	24	26	25	25	25	25
	625	50	1	49	1	49	1	49
	750	50	0	50	0	50	0	50
	875	50	0	50	0	50	0	50
	1000	50	0	50	0	50	0	50
Méthamphétamine	0	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	750	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	24	26	23	27	23	27
	1250	50	0	50	0	50	0	50
	1500	50	0	50	0	50	0	50
	1750	50	0	50	0	50	0	50
	2000	50	0	50	0	50	0	50
Méthadone	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	23	27	24	26	25	25
	375	50	1	49	1	49	2	48
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50

Morphine	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	50	0	49	1	49	1
	300	50	25	25	24	26	24	26
	375	50	1	49	1	49	2	48
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Morphine 2000	0	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	50	0	50	0	50	0
	1500	50	50	0	50	0	50	0
	2000	50	26	24	25	25	23	27
	2500	50	0	50	0	50	0	50
	3000	50	0	50	0	50	0	50
	3500	50	0	50	0	50	0	50
	4000	50	0	50	0	50	0	50
Oxycodone	0	50	50	0	50	0	50	0
	25	50	50	0	50	0	50	0
	50	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	49	1	49	1	49	1
	100	50	24	26	24	26	24	26
	125	50	2	48	1	49	1	49
	150	50	0	50	0	50	0	50
	175	50	0	50	0	50	0	50
	200	50	0	50	0	50	0	50
Phencyclidine	0	50	50	0	50	0	50	0
	6	50	50	0	50	0	50	0
	12.5	50	50	0	50	0	50	0
	19	50	48	2	48	2	49	1
	25	50	23	27	23	27	24	26
	31	50	2	48	1	49	1	49
	37.5	50	0	50	0	50	0	50
	44	50	0	50	0	50	0	50
	50	50	0	50	0	50	0	50
Drogues/médicaments	Concen- tration (ng/mL)	n	Lot1		Lot2		Lot3	
			-	+	-	+	-	+

Propoxyphène	0	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	50	0	50	0	50	0
	150	50	50	0	50	0	50	0
	225	50	49	1	49	1	49	1
	300	50	24	26	23	27	24	26
	375	50	1	49	1	49	1	49
	450	50	0	50	0	50	0	50
	525	50	0	50	0	50	0	50
	600	50	0	50	0	50	0	50
Nortriptyline	0	50	50	0	50	0	50	0
	250	50	50	0	50	0	50	0
	500	50	50	0	50	0	50	0
	750	50	50	0	50	0	50	0
	1000	50	24	26	24	26	24	26
	1250	50	0	50	0	50	0	50
	1500	50	0	50	0	50	0	50
	1750	50	0	50	0	50	0	50
11-nor-Δ9-THC-9-COOH	0	50	50	0	50	0	50	0
	12.5	50	50	0	50	0	50	0
	25	50	50	0	50	0	50	0
	37.5	50	48	2	49	1	49	1
	50	50	24	26	22	28	23	27
	62.5	50	1	49	1	49	2	48
	75	50	0	50	0	50	0	50
	87.5	50	0	50	0	50	0	50
	100	50	0	50	0	50	0	50
Tramadol	0	50	50	0	50	0	50	0
	25	50	50	0	50	0	50	0
	50	50	50	0	50	0	50	0
	75	50	49	1	48	2	48	2
	100	50	24	26	25	25	26	24
	125	50	2	48	2	48	1	49
	150	50	0	50	0	50	0	50
	175	50	0	50	0	50	0	50
		50	0	50	0	50	0	50

Interférence/Composés ne réagissant pas de manière croisée
Les composés suivants ont été évalués pour leur potentiel d'interférence positive ou négative avec le test urinaire rapide de dépistage de drogues Henry Schein ONESTEP+. Tous les composés ont été dissous dans des solutions de contrôle des drogues/médicaments ciblées à 50 % en dessous et 50 % au-dessus de leurs concentrations seuils respectives et ont été testés sur les dispositifs Cup. Un échantillon non modifié a été utilisé comme contrôle. Aucune interférence n'a été constatée pour les composés suivants lorsqu'ils ont été testés à une concentration de 100 µg/ml (sauf indication contraire). Toutes les exceptions notées étaient des résultats positifs dus à une réactivité croisée entre le test et la drogue spécifiée.

(-) Cotinine	Diclofénac sodique	Nitroglycérine
3-hydroxytyramine	Diflunisal	Noréthindrone
7-aminoclonazépam (sauf test MDMA)	Digoxine	Norpropoxyphène
7-aminoflunitrazépam	Diméthyl-aminoantipyrine	Norpseudoéphédrine
7-aminonitrazépam	Diphenhydramine HCl	Nortriptyline (sauf test TCA)
Acétaminophène	Diphénylhydantoïne	Noscapine
Acétone (1000 mg/dl)	Disopyramide	Octopamine
Acétophénatide	Dopamine HCl	Acide O-hydroxyhippurique
Acide acétylsalicylique	Doxépine (sauf test TCA)	Olanzapine
Acyclovir	Doxylamine	Oméprazole
Albumine (100 mg/dl)	D-pseudoéphédrine	Acide oxalique (100 mg/dl)
Albutérol	Duloxétine (sauf test TCA)	Oxazépam (sauf test BZO)
Sulfate d'albutérol (Proair HFA)	Ester méthylique d'ecgonine	Glucuronide d'oxazépam (sauf test BZO)
Alpha Méthadol	EMDP	Acide oxolinique
Aminophylline	Chlorhydrate d'éphédrine (sauf test MET)	Oxymétazoline
Aminopyrine	Érythromycine	Palipéridone
Amitriptyline (sauf test TCA)	Esomeprazole Magnésium	Papavérine
Bésylate d'amlodipine	Estradiol	Pénicilline-G
Amobarbital (sauf test BAR)	Estrone	PénicillineV Potassium
Amoxicilline	Éthanol (1 %)	Perphénazine
Ampicilline	Fenfluramine (sauf test MET)	Phénacétine
Apomorphine	Fénofibrate	Phencyclidine (sauf test PCP)
Ariprazole	Fénoanfène	Phénelzine
Acide ascorbique	Chlorhydrate de fluoxétine	Phényléthylamine
Aspartame	Fluphénazine	Phénobarbital (sauf test BAR)
Aspirine	Fotémustine	Phentermine (sauf test AMP)
Atomoxétine	Furosémide	Phénylpropanolamine
Atorvastatine Calcium	Gabapentine	Prednisone
Atropine	Galactose	Prégabaline
Azithromycine	Gatifloxacine	Procaïne
Baclofène	Gemfibrozil	Promazine (sauf test TCA)
Acide benzilique	Acide gentisique	Prométhazine
Benzocaïne	Glucose (3000 mg/dl)	Propoxyphène (sauf test PPX)
Acide benzoïque	Éther de galactolglycérile	Propranolol
Benzoylcegonine (sauf test COC)	Hémoglobine	Pseudoéphédrine
Benzphétamine	Hexobarbital	Pyridoxine
Benzylpipérazine	Hydralazine	Pyrimidine
Bilirubine	Hydrochlorothiazide	Pyrogallol
Acide borique (1 %)	Hydrocortisone	Quétiapine
Bromo-2,5-Diméthoxyphenet-hylamine	Acide hydroxybutyrique	Quinidine

Bupropion	Ibuprofène	Quinine
Caféine	Imipramine (sauf test TCA)	Acide quinolinique
Cannabidiol	Isoprotérénol	Ranitidine
Captopril	Isoxsuprine	Riboflavine
Carbamazépine	Kétamine	Rifampicine
Carfentanil	Kétoprofène	Acide salicylique
Carisoprodol	LAAM HCl	Sécobarbital (sauf test BAR)
Céfradine	Labétalol	Sérotonine
Céphalexine	Lamotrigine	Sérotonine (5-Hydroxytyramine)
Cétirizine	L-éphédrine	Sertraline
Hydrate de chloral	L-épinéphrine	Citrate de sildénafil
Chloramphénicol	Chlorhydrate de lévofloxacine	Simvastatine
Chlordiazépoxide (sauf test BZO)	Lévonorgestrel	Acide de sodium
Chloroquine	Lévothyroxine sodique	Sulfaméthazine
Chlorothiazide	Chlorhydrate de lidocaïne	Sulindac
Chlorphéniramine (sauf test TCA)	Lisinopril	Telmisartan
Chlorpromazine	Lopéramide	Tétracycline
Cholestérol	Loratadine	Tétrahydrocortisone 3 (β-D-glucuronide)
Chlorhydrate de ciprofloxacine	Lorazépam glucuronide (sauf test BZO)	Tétrahydrocortisone, 3-acétate
Citalopram	L-phényléphrine	Tétrahydrozoline
Clarithromycine	LSD	THC (sauf test THC)
Clofibrate	L-thyroxine	Théophylline
Clomipramine (sauf test TCA)	Magnésium	Thiamine
Clonidine	Maprotiline	Thioridazine
Clozapine	Mépididine	Chlorhydrate de trazodone
Œstrogènes conjugués	Méprobamate	Triamterène
Cortisone	Metformine	Trifluopérazine
Hydrate de créatine	Méthapyrilène	Trifluorométhylphényl-pi-pérazine
Créatinine	Méthacqualone	Triméthobenzamide
Cyclobenzaprine (sauf test TCA)	Méthoxyphénamine (sauf test MET)	Triméthoprim
Cyproheptadine	Méthylphénidate	Tryptamine
D,L-épinéphrine	Tartrate de métoprolol	Tyramine (sauf test AMP)
D,L-isoprotérénol	Métronidazole	Urée (2000 mg/dl)
D,L-lorazépam (sauf test BZO)	Mifépristone	Acide urique
D,L-octopamine	N-acétylprocainamide	Acide valproïque (250 µg/ml)
D,L-Propranolol	NaCl (4000 mg/dl)	Venlafaxine HCl
D,L-tryptophane	Acide nalidixique	Vérapamil
D,L-tyrosine	Chlorhydrate de naloxone (sauf test OXY)	Vitamine B2

Délorazépam	Chlorhydrate de naltrexone (sauf test OXY)	Vitamine C
Démoxépam (sauf test BZO)	Naproxène	Zaléplon
Déoxycorticostérone	N-desméthyl tapentadol	Zolpidem
Desloratadine	Niacinamide	Zomepirac
Désipramine (sauf test TCA)	Nicotine	β-estradiol
Dextrométhorphane	Acide nicotinique	γ-cyclodextrine
Diclofénac	Nifédipine	γ-globuline (500 mg/dl)

BIBLIOGRAPHIE/LECTURE SUGGÉRÉE

1. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 10th ed. Seal Beach, CA: Biomedical Pub.

INDEX DES SYMBOLES

	Ne pas ré-utiliser		Voir le mode d'emploi		Date de péremption
	Tests par kit		Stocker entre 2 et 30 °C		Garder au sec
	Numéro de lot		Réf. catalogue		Conserver à l'abri des rayons du soleil
	Identifiant unique du dispositif		Réservé au diagnostic in vitro		

ASSISTANCE

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce produit, appelez l'assistance technique au 1-866-982-3818 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, heure locale).

Distributed by:
HENRY SCHEIN, INC.
135 DURYEA ROAD
Melville, NY 11747 USA
Made in China
REV.2025/04